



دليل مستخدم تطبيق الجهاز المحمول



المراقبة عن بُعد باستخدام نظام Eversense CGM وتطبيق Eversense NOW

يشمل تطبيق Eversense CGM ميزة اختيارية للمراقبة عن بُعد. تتيح هذه الميزة رؤية بيانات Eversense CGM على شاشة ثانوية عبر تطبيق Eversense NOW للجهاز المحمول.

هدف الاستعمال

تطبيق Eversense NOW معدّ للاستخدام كشاشة ثانوية لعرض بيانات وتنبهات الجلوكوز من مستخدمي Eversense CGM.

موانع الاستعمال

اتبع توجيهات العبادة وتوجيهات المؤسسات الأخرى حول استخدام جهازك المحمول في وجود أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي وجهاز التصوير المقطعي المحوسب ومعدات الإجراءات الأخرى.

المخاطر

قد تكون هناك أوقات لا يمكن فيها إرسال بيانات الجلوكوز إلى تطبيق Eversense NOW. إذا لم تكن تتلقى بيانات الجلوكوز من مستخدم Eversense CGM، فلا يمكنك المساعدة في حالة ارتفاع أو انخفاض قيمة الجلوكوز. توفر خاصية المراقبة عن بُعد شاشة عرض ثانوية للبيانات. فهو ليس نظام مراقبة عن بُعد في الزمن الحقيقي.

قد لا يكون لدى مستخدمي Eversense CGM دائمًا اتصال لدعم نقل البيانات مثل الإنترنت/واي فاي أو 4G/LTE/3G. إذا لم يكن لديك أو لدى مستخدم Eversense CGM اتصال بالإنترنت، فلن تكون بيانات الجلوكوز الخاصة به متوفرة لك لاستعراضها. بإمكان أي مشكلة مع الأجهزة المحمولة أو الإنترنت اللاسلكي أو اتصال البيانات أو نظام إدارة بيانات (DMS) Eversense، أو إذا كان جهاز الإرسال الذكي لدى مستخدم CGM خارج نطاق جهازه المحمول، أو شحن جهاز الإرسال الذكي التسبب بعدم عرض البيانات. يجب ألا يعتمد مستخدم Eversense على أنك تراقب بيانات الجلوكوز لديه لمساعدته في حالة حدث جلوكوز مرتفع أو منخفض.

الفوائد

نظام Eversense CGM المستخدم مع تطبيق Eversense NOW للمراقبة عن بُعد يمكنه أن يمنح مستخدمي CGM ثقة إضافية، لأنهم يعلمون أن أشخاصًا آخرين يمكنهم أيضًا رؤية بيانات CGM الخاصة بهم.

تحذيرات:

- ينبغي عدم استخدام معلومات الجلوكوز المعروضة على تطبيق Eversense NOW لاتخاذ قرارات علاجية. يُعتبر تطبيق Eversense NOW شاشة عرض ثانوية لبيانات Eversense CGM وينبغي عدم استخدامها بدلًا من شاشة Eversense CGM الرئيسية. يجب أن يستعمل مستخدمو Eversense CGM دائمًا قيم جلوكوز الدم من جهاز القياس لاتخاذ قرارات العلاج. إن استخدام قيمة الجلوكوز من المستشعر لاتخاذ قرار علاجي يمكنه أو يؤدي إلى جلوكوز مرتفع أو منخفض في الدم.
- يجب ألا يعتمد مستخدمو Eversense CGM على أشخاص يراقبون قراءات الجلوكوز عن بُعد لإبلاغهم حول أحداث ارتفاع أو انخفاض الجلوكوز.

تنبيهات:

- تطبيق Eversense NOW للجهاز المحمول للمراقبة عن بُعد لا يحل محل نظام المراقبة حسب توجيه مقدم الرعاية الصحية.
- إذا لم تكن خاصية Auto Sync (مزامنة تلقائية - الخاصية التي تمكّن إرسال البيانات تلقائيًا إلى تطبيق Eversense NOW) قيد التشغيل لدى مستخدم Eversense CGM، فقد لا ترى اتجاهات وأحداث الجلوكوز المرتفع أو المنخفض.
- إذا لم يكن لديك ولدى مستخدم Eversense CGM اتصال بالإنترنت، أو إذا توقف عمل الجهاز المحمول لدى مستخدم CGM بسبب بطارية ضعيفة أو فارغة، لا يمكن عرض بيانات Eversense CGM الخاصة به على تطبيق Eversense NOW.
- إذا قمت بإيقاف تشغيل الأصوات على جهازك المحمول، فلن تتلقى على تطبيق Eversense NOW تنبيهات مسموعة حول بيانات CGM التي تقوم بمراقبتها عن بُعد.
- إذا قام مستخدم CGM بضبط وضعه على Offline (غير متصل بالإنترنت)، فلن تتلقى بيانات CGM الخاصة به على تطبيق Eversense NOW لديك.
- لا يتصل تطبيق Eversense NOW مع مستشعر Eversense و/أو جهاز إرسال Eversense الذكي بشكل مباشر.
- لا يستطيع تطبيق Eversense NOW أن يغير الإعدادات في تطبيق Eversense CGM.
- إذا لم تكن تسمح بالإشعارات من تطبيق Eversense NOW، فلن تتلقى تنبيهات متعلقة بالجلوكوز من مستخدم Eversense CGM.
- إذا كان جهازك المحمول مضبوطاً على وضع عدم الإزعاج (Do Not Disturb)، فلن تسمع أي إشعارات من تطبيق Eversense NOW.

استعمال تطبيق Eversense NOW

يقدم دليل المستخدم هذا تعليمات حول كيفية استخدام تطبيق Eversense NOW لمراقبة الجلوكوز عن بُعد لدى مستخدم نظام Eversense CGM.

شكرًا لك لتنزيل تطبيق Eversense NOW للجهاز المحمول. يتيح لك تطبيق Eversense NOW مراقبة بيانات الجلوكوز عن بُعد لدى مستخدم نظام Eversense CGM.

تنبيه: تطبيق Eversense NOW للمراقبة عن بُعد لا يستبدل شاشة العرض الرئيسية على تطبيق نظام Eversense CGM، أو نظام المراقبة بموجب توجيهات مقدم الرعاية الصحية.

متطلبات النظام

للاطلاع على قائمة بالأجهزة المتوافقة، يرجى الانتقال إلى الموقع <https://global.eversenseddiabetes.com/compatibility>.

ملاحظة: اتصال الإنترنت اللاسلكي ضروري لتنزيل التطبيق والحصول على قيم الجلوكوز عن بُعد للعرض على تطبيق Eversense NOW لديك. إذا قام مستخدم Eversense CGM بإيقاف تشغيل المزامنة التلقائية، فلن يتم عرض قيم الجلوكوز على تطبيق Eversense NOW لديك.

اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي وسياسة الخصوصية

يخضع استخدام تطبيق Eversense NOW للشروط والأحكام الواردة في أحدث اتفاقية ترخيص لمستخدم تطبيق Eversense NOW النهائي وسياسة الخصوصية لتطبيق Eversense NOW. يتم تحديث هذه الوثائق على نحو دوري ونشرها على الموقع <https://global.eversenseddiabetes.com/>

أجهزة بدون قيود

لا تستخدم تطبيقات Eversense على أجهزة iPhone أو iPad أو iPod التي بدون قيود. لا توفر الأجهزة التي بدون قيود مستوى مقبولاً من الأمان والدقة للمستخدم وهي غير معتمدة للاستخدام من شركة Senseonics.

المساعدة والدعم

إذا كنت لا تفهم أمرًا ما في دليل المستخدم هذا، يرجى الاتصال بخدمة دعم العملاء (رقم مجاني في الولايات المتحدة) على الرقم (844-736-7348) 844-SENSE4U. ومن خارج الولايات المتحدة، اتصل بموزعك المحلي أو قم بزيارة الموقع <https://global.eversensedibabetes.com/> لتحديد موقع موزعك المحلي.

الانضمام إلى Eversense Circle

تشير *Eversense Circle* إلى مجموعة الأشخاص القادرين على مراقبة بيانات الجلوكوز والتنبيهات المرتبطة بالجلوكوز عن بُعد لدى مستخدم *Eversense CGM*. للانضمام إلى *Circle*، ستحتاج أن تقبل دعوة بالبريد الإلكتروني ستلقاها من مستخدم *Eversense CGM*، وإنشاء حساب على موقع *Eversense DMS* وتنزيل تطبيق *Eversense NOW* للجهاز المحمول.

برنامج *Eversense DMS* هو تطبيق معتمد على الإنترنت متوافق مع نظام *Eversense CGM* لعرض بيانات وتقارير الجلوكوز التاريخية للمساعدة في تحديد اتجاهات الجلوكوز كعامل مساعد في معالجة مرض السكري. كما يتيح لك برنامج *Eversense DMS* إنشاء حساب بحيث تتمكن من رؤية بيانات الجلوكوز عن بُعد باستخدام تطبيق *Eversense NOW* لديك. لا يمكنك رؤية بيانات الجلوكوز عن بعد من خلال برنامج *Eversense DMS*. لتعلم المزيد عن برنامج *Eversense DMS*، توجه إلى الموقع <https://global.eversenseddiabetes.com/>.

قبول دعوة للانضمام إلى Eversense Circle




Eversense Circle هي مجموعة من الأشخاص قد قام مستخدم Eversense CGM بدعوتهم لرؤية بياناته الخاصة بالجلوكوز والتنبيهات عن بُعد.

1. سوف تصلك دعوة بالبريد الإلكتروني، “Request to view glucose data”، للانضمام إلى Eversense CGM user’s Circle.

ملاحظة: إذا كنت تتوقع دعوة ولا تراها في Inbox، فافحص ملفات Spam أو Junk.

2. انقر فوق الرابط في البريد الإلكتروني.

3. قم بتسجيل الدخول في حساب Eversense الخاص بك.

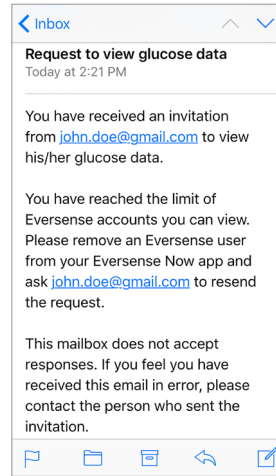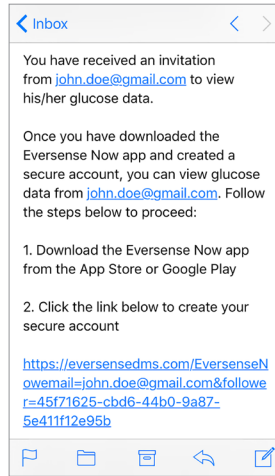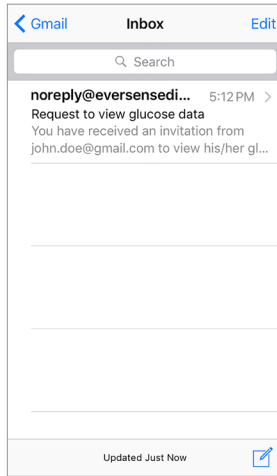

ملاحظة: يتيح لك تطبيق Eversense NOW الانضمام إلى ما يصل حتى 10 من دوائر Eversense Circle. إذا تمت دعوتك للانضمام إلى Circle حادية عشر، فستلقى رسالة إلكترونية تطلب منك إزالة نفسك من Circle الحالية قبل إضافتك إلى Circle جديدة.

7 دليل مستخدم تطبيق Eversense NOW للجهاز المحمول

4. قم بإنشاء حساب Eversense لتسجيل الدخول إلى التطبيق.

5. عند الطلب، راجع الاتفاقية وانقر فوق Accept للموافقة على شروط اتفاقية الترخيص. سوف تظهر شاشة log in.

ملاحظة: إذا كان لديك حساب Eversense سابق، فلن تحتاج إلى إنشاء حساب جديد لاستخدام Eversense NOW. انقر فوق الرابط الموجود في دعوة البريد الإلكتروني وقم بتسجيل الدخول إلى حساب Eversense الموجود. عندما ستقوم بتحديث الصفحة الرئيسية في تطبيق Eversense NOW، سترى اسم مستخدم CGM الذي قد قبلت دعوته.

6. قم باختيار وحدة القياس. سوف تنطبق وحدة القياس التي ستختارها على جميع مستخدمي Eversense CGM الذين يمكنك رؤية بياناتهم. لا يمكنك تغيير وحدة القياس بعد أن يتم تثبيت التطبيق.

eversense now
END USER LICENSE AGREEMENT
SENSEONICS, INCORPORATED
END-USER LICENSE AGREEMENT (EUROPE)
Effective Date: Nov 2016
Last Updated: September 2021
IMPORTANT - PLEASE READ THE TERMS OF THIS
END-USER LICENSE AGREEMENT (THE "EULA")
CAREF
CONTI By clicking on the "Accept" button, I J
AND S confirm that I have read the Privacy E, AS
(SEN Policy and additionally provide my
APPLI consent for the processing of my
MOBIL health-related data - in order to be
NANA used by Senseonics to provide and
DMS F operate the Senseonics Products and
MOBIL Services. I also understand that my
SENSE data may occasionally be transferred
INCLU to countries outside of the EEA, S,
AND IV including the US, which do not EACH
AND C necessarily provide an equivalent level S
EULA, of personal data protection as in the
SOFTY EEA.
REGUI
EURO
PROTI Cancel Accept JLA
DOES NOT APPLY TO OTHER
SENSEONICS PRODUCTS AND SERVICES.
SEPARATE FROM THIS EULA, OTHER TERMS AND
CONDITIONS SHALL APPLY WITH RESPECT TO
YOUR PERSONAL AND/OR HEALTH DATA
SUBMITTED AND COLLECTED THROUGH THE
SOFTWARE. THESE ADDITIONAL TERMS AND
CONDITIONS ARE CONTAINED IN SENSEONICS'
"PRIVACY POLICY & TERMS OF USE"
(HYPERLINKED TO
Cancel Accept

eversense now
California, USA
Email
Password
Create an account Forgot my password
LOG IN

Back Finish
UNIT OF MEASUREMENT
Your glucose reading has been set to be measured and displayed in the unit of measurement shown below.
Unit of Measurement: mg/dL
Example: 160 mg/dL (or anywhere in the 40-400 mg/dL range)
mg/dL ✓
mmol/L
If you wish to change your unit of measurement to mmol/L, you can only do so at this time. Before changing this setting, please consult with your doctor if you are unsure what your unit of measurement should be.

9 دليل مستخدم تطبيق Eversense NOW للجهاز المحمول

إزالة أحد مستخدمي Eversense CGM من قائمتك

إن إزالة أحد مستخدمي Eversense CGM من قائمتك تعني أنك لن تكون قادرًا بعد الآن على مراقبة بيانات الجلوكوز الخاصة به عن بُعد. لإرجاع مستخدم إلى قائمتك مرة أخرى، تواصل مع مستخدم Eversense CGM ليرسل لك دعوة جديدة.




1. قم بتمرير اسم مستخدم نظام Eversense CGM على الصفحة الرئيسية إلى اليسار.

2. انقر على "Delete".

سيطالبك إنذار بتأكيد رغبتك في إزالة مستخدم Eversense CGM.



3. انقر فوق "Yes" لإزالة هذا الشخص نهائيًا من قائمتك.

لن تعرض الصفحة الرئيسية هذا المستخدم في قائمتك بعد الآن.

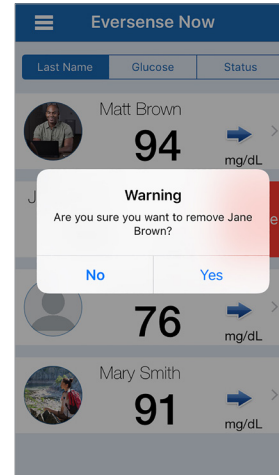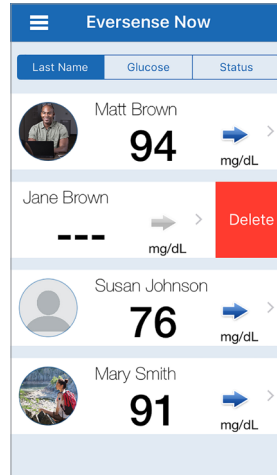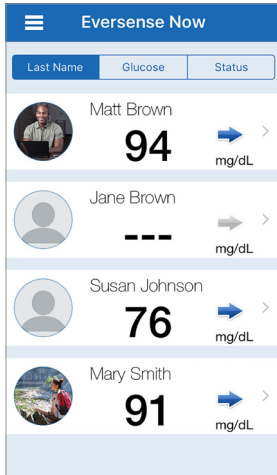

دليل مستخدم تطبيق Eversense NOW للجهاز المحمول 10

ملاحظة: قد يستغرق الأمر حتى ساعتين قبل أن يرى مستخدم Eversense CGM أنك لم تعد في دائرته على تطبيق Eversense CGM.

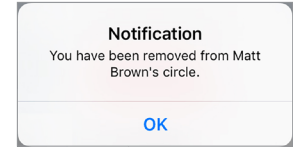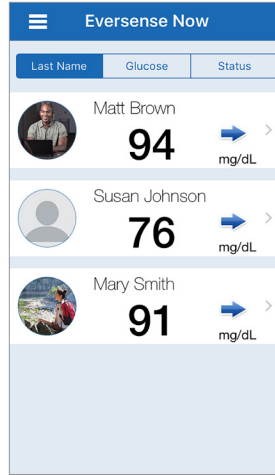

ملاحظة: يستطيع أحد مستخدمي Eversense CGM أيضًا أن يقوم بإزالةك من دائرته. إذا حدث ذلك، فسيظهر هذا الإشعار.



11 دليل مستخدم تطبيق Eversense NOW للجهاز المحمول

القائمة الرئيسية


تعرض القائمة الرئيسية إمكانية الوصول إلى *Eversense NOW Home page*، صفحة *About*، و صفحة *log out*.

من القائمة الرئيسية، يمكنك الوصول إلى Home لرؤية مستخدم Eversense CGM في قائمتك أو استعراض المعلومات حول تطبيق Eversense NOW على صفحة About أو log out من التطبيق أو إضافة profile picture.

للوصول إلى خيارات القائمة الرئيسية، انقر فوق رمز الأشرطة الثلاثة في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

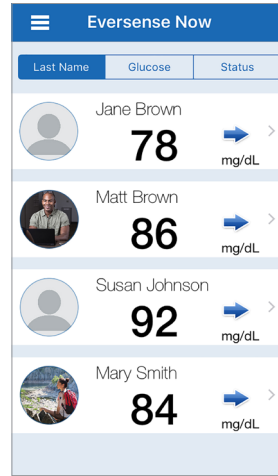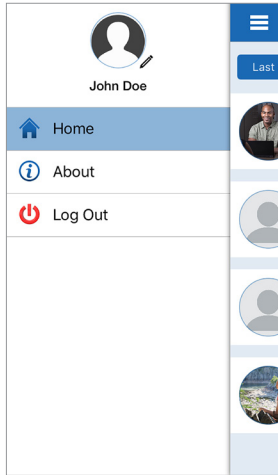


Home

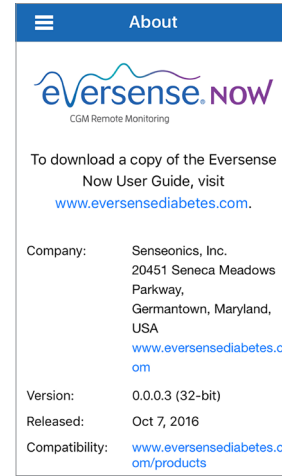

About


دليل مستخدم تطبيق Eversense NOW للجهاز المحمول 12

سوف يطلب منك Eversense NOW التأكيد قبل تسجيل الخروج. إذا خرجت من التطبيق، فستحتاج إلى إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لإعادة فتح التطبيق.

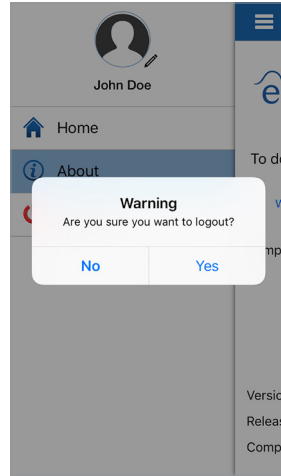

Log Out

يمكنك إضافة صورة للملف الشخصي من خلال النقر فوق profile photo في Main Menu على تطبيق Eversense NOW. اتبع رسائل المطالبة على الشاشة لالتقاط أو إضافة صورة قد تم حفظها على جهازك المحمول. صورة الملف الشخصي التي ستضيفها ستعرض أيضاً على تطبيق مستخدم CGM إلى جانب اسمك.

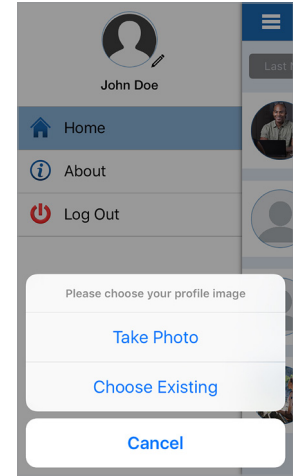

Profile Pictures

13 دليل مستخدم تطبيق Eversense NOW للجهاز المحمول

رؤية بيانات CGM

تعرض *Home Page* قائمة بأسماء الأشخاص الذين يمكنك رؤية بيانات *CGM* الخاصة بهم عن بُعد، بالإضافة إلى أحدث قيمة *CGM* لديهم، وسهم اتجاه يشير إلى اتجاه ومعدل التغيير.

يتم ترتيب القائمة حسب اسم العائلة كخيار افتراضي. يمكنك ترتيب القائمة حسب اسم العائلة أو قيمة الجلوكوز أو الوضع عن طريق النقر فوق علامة التبويب المرغوبة بأعلى الصفحة.

Eversense NOW Home Page


لتحديث *Home Page*:

1. افتح *Home Page*.


2. قم بالتمرير للأسفل من داخل *Home Page* (إذا كنت تستعمل جهاز *iOS*، فعند التمرير من أعلى الشاشة تفتح تطبيقات مصغرة (ويديجت) لـ *iOS* بدلاً من تحديث *Home Page*).

يتم تحديث *Glucose data* من مستخدم *CGM* بشكل تلقائي على تطبيق *Eversense NOW* كل ٥ دقائق تقريباً عندما يكون لديك ولدى مستخدم *CGM* اتصال بالإنترنت.


تنبيه: إذا قام مستخدم *Eversense CGM* بإيقاف تشغيل *Auto Sync*، فلن يتم إرسال بيانات الجلوكوز تلقائياً إلى تطبيق *Eversense NOW* لديك.

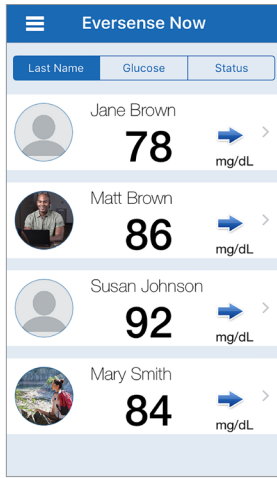

ترتيب Home Page حسب Last Name

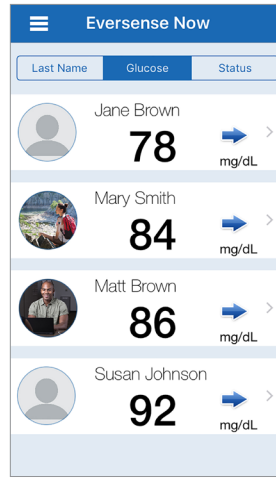

ترتيب Home Page حسب Glucose Value

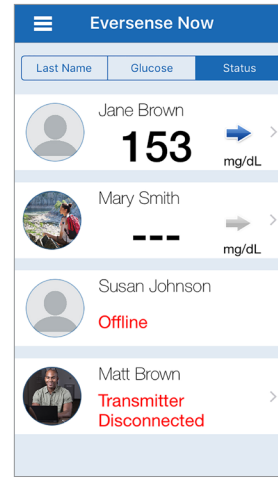

تصنيف Home Page حسب Status

15 دليل مستخدم تطبيق Eversense NOW للجهاز المحمول

أسهم الاتجاهات

سوف ترى بجانب اسم مستخدم Eversense CGM سهم الاتجاه. يُظهر سهم الاتجاه اتجاه الجلوكوز الحالي ومدى سرعة تغير اتجاه الجلوكوز.

يستخدم التطبيق **last 20 minutes of continuous glucose data** لحساب اتجاهات الجلوكوز. عند عدم توافر قيم مستشعر كافية لإجراء الحساب، يظهر السهم باللون الرمادي. ←

مستويات الجلوكوز التي ترتفع أو تنخفض تدريجيًا، والتي تنخفض أو ترتفع بمعدل يتراوح بين 0.0 mg/dL و 1.0 mg/dL في الدقيقة. ←

مستوى الجلوكوز الذي يرتفع بمعدل معتدل يتراوح بين 1.0 mg/dL و 2.0 mg/dL في الدقيقة. ←


مستويات الجلوكوز التي تنخفض بمعدل معتدل يتراوح بين 1.0 mg/dL و ٢.0 mg/dL في الدقيقة. ←

مستويات الجلوكوز التي ترتفع بمعدل سريع جدًا يزيد على 2.0 mg/dL في الدقيقة. ↑

مستويات الجلوكوز التي تنخفض بمعدل سريع جدًا يزيد على 2.0 mg/dL في الدقيقة. ↓

الوضع

هناك أربعة أوضاع مختلفة قد تراها بجوار اسم مستخدم نظام Eversense CGM.

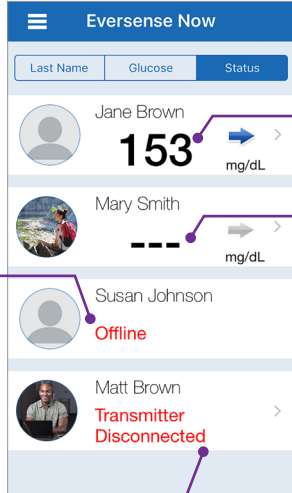

قراءة الجلوكوز الأخيرة
يتلقى المستخدم بيانات الجلوكوز بشكل فعال.

“---”
تم توصيل جهاز الإرسال الذكي الخاص بالمستخدم ولكنه لا يتلقى حاليًا بيانات الجلوكوز أو أنه لا توجد بيانات جلوكوز كافية لعرض قيمة ما. وقد يكون هذا بسبب:

- نظام CGM في مرحلة الإحماء.
- مستخدم CGM في مرحلة التهيئة ولم يحصل حتى الآن على أول قراءة للجلوكوز لديه.
- تلقى المستخدم تنبيهًا يمنع عرض بيانات الجلوكوز.


“Offline”
لقد أوقف المستخدم مشاركة البيانات معك بشكل مؤقت. (قد يستغرق الأمر حتى 10 دقائق ليتم عرض تحديث الوضع هذا على تطبيق Eversense NOW لديك.)


“Transmitter Disconnected”
لا يوجد توصيل بين جهاز الإرسال الذكي وتطبيق Eversense CGM. وقد يكون هذا بسبب:

- ينبغي إعادة شحن بطارية جهاز الإرسال الذكي أو يتم شحنها.
- من الممكن أنه قد تم إيقاف تشغيل اتصال Bluetooth أو اتصال الإنترنت أو الجهاز المحمول.
- جهاز الإرسال الذكي خارج النطاق أو تم إيقاف تشغيله.
- قام مستخدم CGM بإيقاف تشغيل المزامنة التلقائية.

دليل مستخدم تطبيق Eversense NOW للجهاز المحمول 17

الرسم البياني للاتجاه

للإطلاع على معلومات أكثر تفصيلاً عن الجلوكوز لدى مستخدم CGM، انقر فوق اسم أي شخص يستخدم نظام Eversense CGM على الصفحة الرئيسية. تعرض الشاشة الأولى رسماً بيانياً لاتجاه قيم الجلوكوز من مستشعر المستخدم خلال الساعات الثلاث الماضية. يُظهر سهم الاتجاه اتجاه تحرك الجلوكوز الحالي ومدى سرعة تغيير اتجاه الجلوكوز. لتحديث الشاشة، انقر فوق  رمز التحديث.

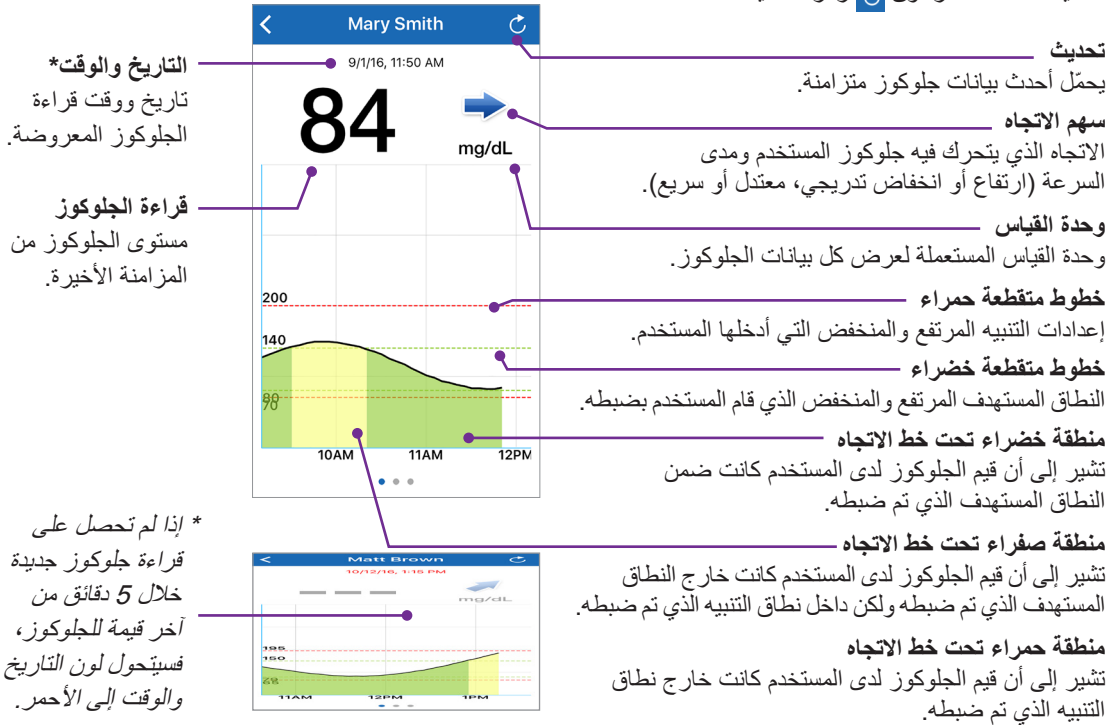


دليل مستخدم تطبيق Eversense NOW للجهاز المحمول 18

تنبيهات Eversense NOW


عندما يتلقى مستخدم Eversense CGM تنبيهًا مرتبطًا بالجلوكوز، سيتلقى أعضاء دائرته أيضًا التنبيه من تطبيق Eversense NOW. سوف تظهر هذه التنبيهات بإحدى الطرق الأربعة التالية: على شاشة الإغلاق أو كشعار في الجزء العلوي من الشاشة أو كشاشة منبثقة في التطبيق أو على ساعة Apple.

تحذير: ينبغي عدم استخدام معلومات الجلوكوز المعروضة على تطبيق Eversense NOW لاتخاذ قرارات علاجية. يُعتبر تطبيق Eversense NOW شاشة عرض ثانوية لبيانات Eversense CGM وينبغي عدم استخدامها بدلًا من شاشة Eversense CGM الرئيسية.


ملاحظة: يجب تمكين انعكاس الإشعار (Notification mirroring) في إعدادات إشعارات ساعة Apple لـ Eversense NOW من أجل الحصول على تنبيهات الجلوكوز على ساعة Apple.

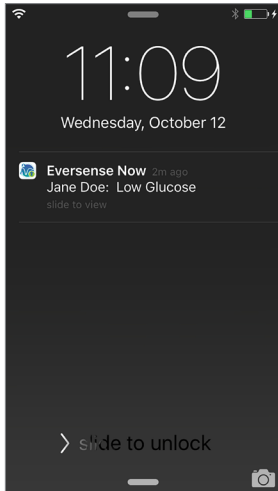


تنبيه: إقفال الشاشة

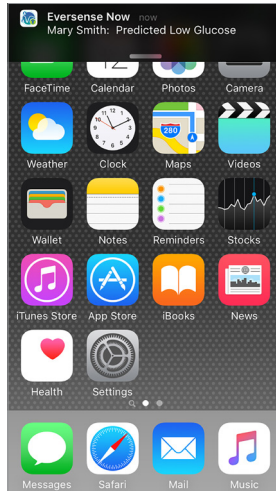

تنبيه: إشعار

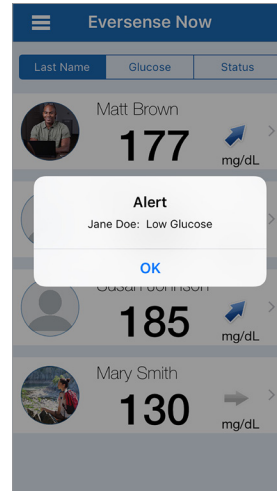

تنبيه: شاشة منبثقة في التطبيق

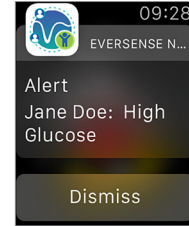

تنبيه: على ساعة Apple

دليل مستخدم تطبيق Eversense NOW للجهاز المحمول 19

تاريخ التنبيهات

لرؤية تاريخ تنبيهات الجلوكوز لدى مستخدم نظام Eversense CGM، قم بالتمرير على الشاشة إلى اليسار من الرسم البياني للاتجاه.

سوف تدرج شاشة **Alert History** آخر 20 تنبيهًا مرتبطًا بالجلوكوز قد وصل للمستخدم على تطبيق Eversense CGM.

تراقب هذه التنبيهات الأحداث مثل ارتفاع أو هبوط معدلات الجلوكوز وكذلك قيم الجلوكوز المنخفضة أو المرتفعة (انخفاض سكر الدم أو ارتفاع سكر الدم).

ملاحظة: سوف تتلقى تنبيهات جلوكوز مرتفع أو منخفض تنبؤية فقط إذا قام مستخدم Eversense CGM بتمكين التنبيهات التنبؤية.

Event Log

لرؤية Event Log الخاص بمستخدم نظام Eversense CGM، قم بالتمرير على الشاشة نحو اليسار من Alert History.

يُدرج **Event Log** آخر 20 حدثًا تم تسجيله من قبل مستخدم CGM. يعرض Event Log المعلومات التي تم إدخالها من قبل مستخدم Eversense CGM مثل المعايرة، وجبات الطعام، التمارين، قيم جلوكوز الدم، مستويات الأنسولين، الصحة وممارسة الرياضة. إذا لم يتم المستخدم بإدخال أي أحداث، فسيكون هذا السجل فارغًا.

Glucose Alerts	
Wednesday, July 13, 2016	
High Glucose	08:52 PM
High Glucose	04:21 PM
Rate Falling	01:58 PM
High Glucose	01:56 PM
High Glucose	01:28 PM
High Glucose	01:08 PM
Predicted High Glucose	12:48 PM
Low Glucose	09:55 AM
Thursday, July 07, 2016	
Predicted Low Glucose	11:08 AM

Event Log	
Thursday, July 21, 2016	
Meal	01:43 PM
Exercise	01:43 PM
Calibration, 111 mg/dL	12:30 PM
Calibration, 126 mg/dL	11:27 AM
Calibration, 79 mg/dL	08:02 AM
Meal	07:42 AM
Wednesday, July 20, 2016	
Calibration, 152 mg/dL	06:02 PM
Calibration, 79 mg/dL	08:02 AM
Tuesday, July 19, 2016	

دليل مستخدم تطبيق Eversense NOW للجهاز المحمول 20

Distributed by:

DYN Diagnostics Ltd.
7 Ha'eshel St. P.O. Box 3063
Caesarea Industrial Park 3079504, Israel
Phone: 04-6175390
Email: patient.care@dyn.co.il

שם האמ"ר:
מערכת לניטור סוכר רציף Eversense XL
Eversense XL Continuous Glucose Monitoring System
מס' רישום: 2660676

פרטי בעל הרישום:
דין דיאגנוסטיקה
רח' האשל 7, פארק תעשייה דרומי קיסריה, 3079504
1800-333-636
patient.care@dyn.co.il

למידע מן המעלומות חול מנתגות Eversense, ירגי זיראת המוע eversenseddiabetes.com.



(241) LBL-0307-44-001_REV_D

CE²⁷⁹⁷
Authorised 2016

Emergo Europe شركة
Molenstraat 15
2513 BH The Hague
هولندا

EC REP

تم التصنيع بواسطة شركة
Senseonics, Inc.
20451 Seneca Meadows Parkway
Germantown, MD 20876-7005
الولايات المتحدة الأمريكية
844.SENSE4U | 301.515.7260
(844.736.7348)
eversenseddiabetes.com

حقوق النشر © 2017 Senseonics, Inc. رقم القطعة: LBL-0307-44-001 المرجع D 10/2021