


eversense^{E3}

Continuous Glucose Monitoring System

מדריך עיון מהיר

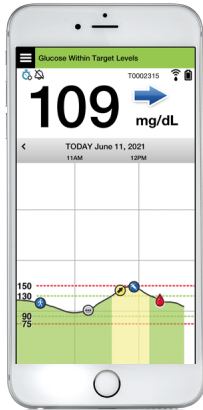

אפליקציה ניידת



משדר חכם



חיישן

התוויות לשימוש

מערכת Eversense E3 CGM מיועדת למדידה רציפה של רמות הסוכר בנוזל הבין-תאי במבוגרים (גיל 18 ומעלה) עם סוכרת לתקופה של עד 180 ימים. מערכת זו מיועדת לשימוש בכדי להחליף מדידות רמות הסוכר בדם האצבע עבור החלטות טיפול הקשורות לסוכרת.

המערכת מיועדת:

- לספק קריאות סוכר בזמן אמת.
- לספק מידע על מגמת הסוכר.
- לסייע בניהול הסוכרת.
- לספק התרעות לזיהוי וחיזוי של אירועים של רמת סוכר נמוכה בדם (היפוגליקמיה) ורמת סוכר גבוהה בדם (היפרגליקמיה).
- ניתן לפרש נתונים היסטוריים מן המערכת על מנת לעזור בהתאמת המשך הטיפול. התאמות אלה צריכות להתבסס על המגמות והדפוסים הנצפים לאורך זמן.
- מערכת זו מיועדת לשימוש על ידי מטופל בודד.


התוויות נגד

- אנשים להם יש התוויות נגד דקסמתזון או דקסמתזון אצטט לא ישתמשו במערכת.
- המשדר החכם אינו תואם להליכי הדמיה בתהודה מגנטית (MRI). על מטופלים להימנע מהליך MRI כאשר הם נושאים את המשדר החכם. למידע נוסף על החיישן, אנא עיין במידע הבטיחות ל-MRI במדריך למשתמש במערכת Eversense E3 CGM.
- מניטול או סורביטול, כאשר הם ניתנים באופן תוך ורידי, או כחלק מתמיסת עירוי או תמיסת דיאליזה צפקית, עלולים להעלות את ריכוזי המניטול או הסורביטול ולגרום לקריאות גבוהות מזויפות של התוצאות המסופקות על ידי החיישן שלך. חלק מן הממתיקים המלאכותיים עושים שימוש בסורביטול, ורמות ריכוז מצריכה נורמלית כחלק מן התזונה לא תשפיענה על קריאות החיישן.

נשיאת המשדר החכם

- החלף את המדבקה הדביקה שעל המשדר החכם מדי יום.
- ניתן להסיר את המשדר החכם ולהצמידו מחדש לעור בכל עת.

הערה: המשדר החכם שלך עמיד בפני מים (IP67) עד לעומק של מטר אחד (3.2 רגל) למשך עד 30 דקות.

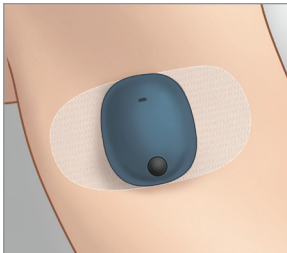

משדר חכם Eversense E3

המשדר החכם הנטען שלך מפעיל את החיישן, מחשב את קריאות הסוכר, מאחסן את הנתונים ושולח אותם לאפליקציה. בנוסף, הוא מספק התרעות ברטט על הגוף. המשדר החכם מוצמד לעור בעזרת מדבקה דביקה חד-פעמית שאותה יש להחליף מדי יום.



הפעל וכבה את המשדר החכם

על מנת להפעיל את המשדר, לחץ והחזק את לחצן ההפעלה למשך כחמש שניות.


על מנת לכבות את המשדר, לחץ והחזק את לחצן ההפעלה למשך כחמש שניות.

בכדי לראות אם המשדר החכם שלך פועל, לחץ על לחצן ההפעלה פעם אחת. אם נורית החיווי נדלקת, המשדר החכם פועל. אם הנורית איננה נדלקת, המשדר החכם כבוי.

שלבי תחילת השימוש

3. התאם את ארבעת הפינים המזוהבים בחלק התחתון של המשדר החכם לארבעת הפינים המזוהבים בעריסת הטעינה.

לאחר שהסוללה נטענה במלואה (כ-15 דקות), תידלק נורית ירוקה קטנה בחלק העליון של המשדר החכם. הסר את כבל ה-USB מעריסת הטעינה לאחר הטענה מלאה על ידי משיכה לאחור של הלשונית על גבי העריסה, והוצאה של המשדר החכם.

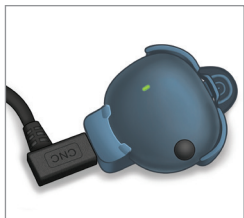

הערה: המשדר החכם שלך יכול לתקוע לקיר המתאים לשימוש באזור המקומי שלך.

טעינת המשדר החכם

לפני שתתחיל, אתה תצטרך:

- מכשיר נייד תואם.
- לרשימת מכשירים תואמים, אנא בקר באתר <https://global.eversensedidiabetes.com/compatibility>
- חיבור אלחוטי לאינטרנט.
- משדר חכם Eversense E3 טעון לגמרי.

- 1.** הכנס את הקצה הרגיל של כבל ה-USB אל מתאם יציאת ה-USB.
- 2.** חבר את הקצה הקטן של כבל ה-USB לתוך עריסת הטעינה של יציאת ה-USB.



חשוב: השתמש בשנאי מתח AC ובכבל ה-USB שסופקו עם המשדר החכם בלבד לצורך טעינת סוללת המשדר החכם ולעולם אין להכניס כל עצם אחר מאשר כבל הטעינה אל יציאת ה-USB של המשדר. שימוש במקור מתח אחר עלול לגרום למשדר החכם נזק שימנע קבלת תקינה של קריאות הסוכר, ליצור סכנת אש ואף עלול לגרום לביטול האחוריות שלך. אם שנאי המתח וכבל ה-USB שלך של Eversense פגומים או שהם אבדו, צור קשר עם תמיכת הלקוחות להחלפה על מנת להבטיח הפעלה בטוחה של המכשיר.

הורדת אפליקציית Eversense וקישור המשדר החכם

הורד והתקן את האפליקציה

1. הורד את אפליקציית Eversense החינמית מ- Apple App Store או מ-Google Play.

ההנחיות להתקנת האפליקציה במערכות ההפעלה של iOS שונות מאלה של מערכות ההפעלה של Android.

הערה: וודא שהמכשיר הנייד שלך עושה שימוש במערכת ההפעלה התואמת העדכנית ביותר.

2. במסך ההתקנה, לחץ על **Install application** (התקן אפליקציה) ופעל בהתאם להוראות ההתקנה.



לאחר 1-2 דקות, בדוק אם הסמל של אפליקציית Eversense מופיע בתצוגת המכשיר הנייד.


חשוב: וודא שיש לך חיבור אלחוטי לאינטרנט, שהתאריך והשעה המופיעים על גבי המכשיר הנייד שלך נכונים ושה-Bluetooth מופעל לפני שתמשיך.

הערה: כאשר תתבקש, סקור את ההסכם והקש על **Accept** (קבלה) כדי להסכים לתנאי הסכם הרישיון. מסך **LOG IN** (כניסה) יופיע.




הקש על סמל Eversense כדי להפעיל את האפליקציה.


3. ציין שיש לך את המשדר
החכם שלך על ידי לחיצה
על אופציה זו.

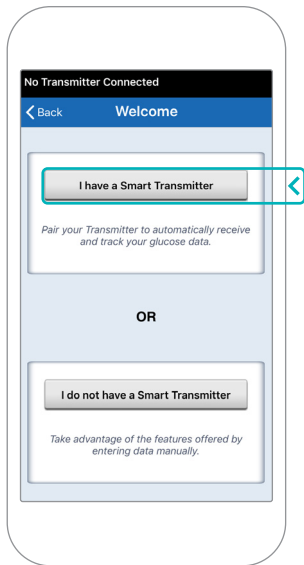

2. הזן את המידע הקשור
לחשבון שלך ולחץ **Submit**
(הגשה).

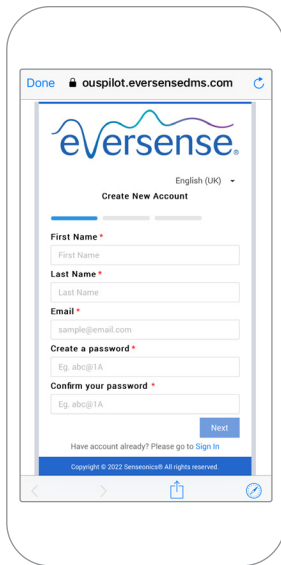

1. צור חשבון עם כתובת
דוא"ל וססמה.

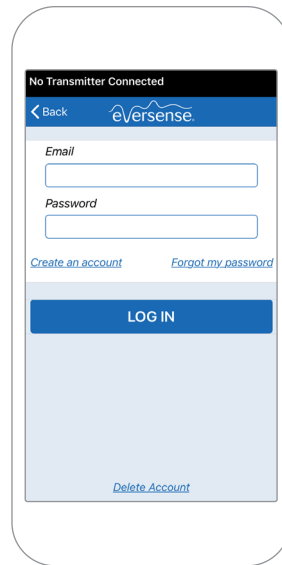


הערה: במערכות הפעלה אנדרואיד תתבקש לאשר ולאפשר שירותי מיקום או Bluetooth כדי להתחבר אל המשדר החכם עם המכשיר הנייד ולקבל התראות ממערכת Eversense E3 CGM.

4. הפעל את המשדר החכם שלך והגדר אותו אל "Discoverable Mode" (מצב ניתן לגילוי) על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה שלוש פעמים. נורית החיווי תהבהב בירוק וכתום.




5. הקש על **Not Connected** (לא מחובר) כדי להתחיל בתהליך הקישור.

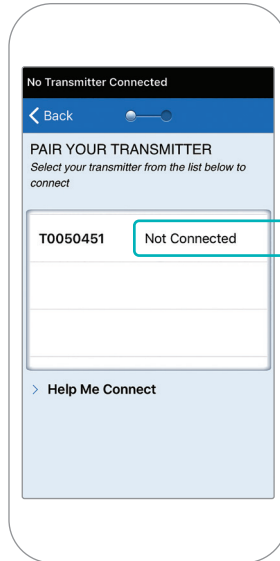

הערה: אם אתה לא רואה את המשדר החכם שלך כאופציה, עיין במדריך למשתמש במערכת **Eversense E3 CGM** למידע נוסף.

6. לחץ על **Pair** (קישור) ולאחר מכן לחץ על **Next** (הבא) בכדי להמשיך היכן ש-"Connected" (מחובר) מופיע.

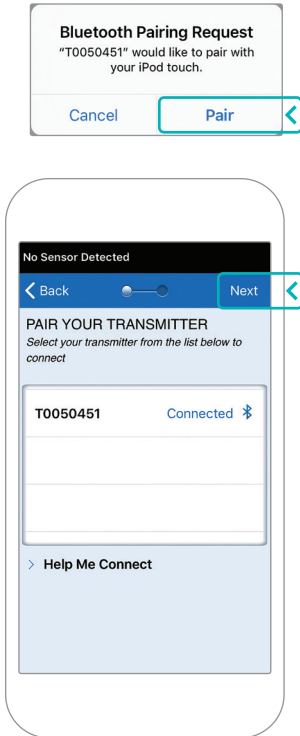

8. קרא ולחץ דרך מסכי המבוא המספקים מידע אודות הזמן בו יש לקחת החלטות עם מערכת ה-Eversense E3 CGM.

No Transmitter Connected

← Back Next

Symptoms don't match the app?
If your symptoms do not match what you see on the Eversense CGM Mobile App, use your BG meter to confirm with a fingerstick check before making a treatment decision.

If you are unsure, do a fingerstick check with your BG meter.

No Sensor Detected

← Back Next

Treatment decisions OK
Make a treatment decision when ALL of the information below is available.

Recent trend information and alerts

No Transmitter Connected

← Back Next

Welcome to the Eversense CGM Mobile App.

This short introduction will help you understand when to use the CGM system to make treatment decisions.

You should use your meter to make treatment decisions until you understand how the duration of insulin action impacts your glucose in different situations.

Refer to your Eversense CGM System User Guide for complete information on making treatment decisions using your CGM System.

7. יחידת המידה הסטנדרטית עבור האזור שלך נבחרה מראש. קריאות הסוכר שלך תוצגנה תמיד ביחידת מידה זו. אל תשנה את יחידת המידה אלא אם כן שוחחת על כך עם הצוות הרפואי שלך.

לחץ על **Finish** (סיום) בכדי להמשיך.

No Sensor Detected

← Back Finish →

UNIT OF MEASUREMENT
The glucose reading has been **set** to be displayed in the unit of measurement shown below.

Unit of Measurement: **mg/dL**
Example: 160 mg/dL (or anywhere in the 40-400 mg/dL range)

mg/dL

mmol/L

If you wish to change your unit of measurement to **mmol/L**, you can only do so at this time. Before changing this setting, please consult with your doctor if you are unsure what your unit of measurement should be.

No Transmitter Connected

← Back Done

Summary
Should you make a treatment decision?

Yes.

No. Symptoms don't match the app.

No.

No.

No Transmitter Connected

← Back Next


Treatment decision not OK
You should not make a treatment decision when:

No glucose value is displayed—no reading is available.

Glucose value is displayed in grey—no enough data to display trend arrow.

9. לחץ על סמל **MAIN MENU** (תפריט ראשי)
על מנת לקבל גישה לכל פונקציות האפליקציה
מתפריט נשלף.

הערה: במסך זה לא יוצגו נתוני סוכר עד
שהחיישן יוחדר ותתחיל בכיול המערכת.

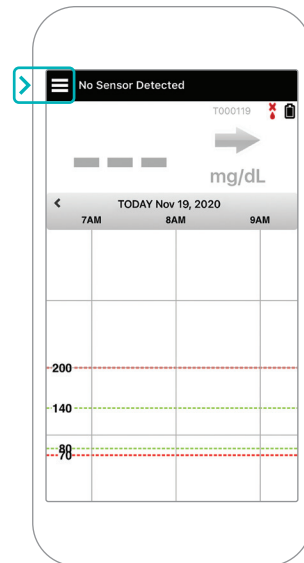

קישור של החיישן אל המשדר החכם



לאחר שהחיישן הוחדר על ידי הצוות הרפואי שלך וביצעת קישור בין המשדר החכם שלך והאפליקציה, יש לקשר את החיישן שלך אל המשדר החכם שלך. הדבר יתחיל עם שלב חימום של 24 שעות. אין צורך לשאת את המשדר החכם במהלך שלב החימום על מנת לקשר את החיישן, על המכשיר הנייד שלך להיות מחובר אל האינטרנט ועל המשדר שלך להיות טעון, מופעל ומקושר אל המכשיר הנייד שלך.

כאשר אתה מחבר את החיישן בפעם הראשונה, עם תחבושת ה-Tegaderm™ מעל מיקום ההחדרה, כנראה שהחתך נמצא במרכז ה-Tegaderm. פירושו של דבר הוא שכנראה החיישן נמצא מעל מרכז ה-Tegaderm. בפעם הראשונה בה אתה מקשר את החיישן, אל תשתמש במדבקת ה-Eversense הדביקה שלך על גבי המשדר החכם. בעת העמדת המשדר החכם מעל החיישן, הוא צריך להיות טיפה מעל מרכז מדבקת ה-Tegaderm.

עצה: יכול להיות שהחיישן שלך לא יהיה ניצב בדיוק אל החתך. אם אתה מוצא שקשה לך לקבל אות טוב או מצוין במדריך המיקום, אין להפעיל לחץ. נסה לסובב טיפה את המשדר החכם מעל לחיישן. המתן ששנייה עד לרענון מדריך המיקום בין כל התאמה של עמדת המשדר החכם מעל לחיישן.


לפרטים נוספים על חיבור החיישן, אנא עיין בחלק חיבור החיישן במדריך למשתמש במערכת *Eversense E3 CGM*.

העמד את המשדר החכם מעל לחיישן

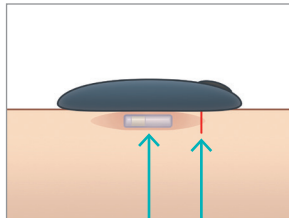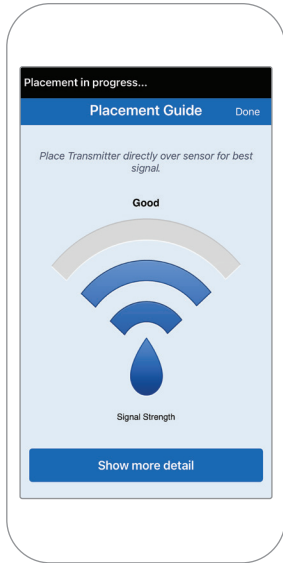

חיישן מחבר




- על מנת לקבל את האות הטוב ביותר, הרם והזז בעדינות את המשדר החכם לפי הצורך עד שמדריך המיקום מראה 2-3 קווים (טוב עד מצוין).
 - סגור את מדריך המיקום.
- עצה:** יכול להיות שהדבר יעזור אם תביט במראה במהלך העמדת המשדר החכם שלך.

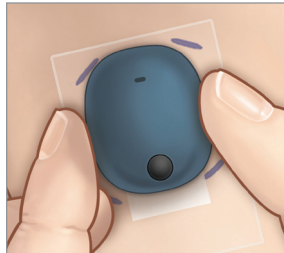

1. מקם את המשדר החכם ישירות על החיישן שהוחדר עד שהמשדר החכם יפסיק לרטוט וההודעה **New Sensor Detected** (זוהה חיישן חדש) תופיע באפליקציה.
- פתח את מדריך המיקום באפליקציה.
- היעזר בסימון קצוות המשדר הנראה לעין כהכוונה, הנח בעדינות את המשדר החכם לכיוון החלק העליון של החבישה.
- הבט במדריך המיקום עבור חוזק האות – הדבר עלול לקחת כמה שניות.

2. הקש על **Link Sensor** (קשר חיישן) ולאחר מכן על **Link Detected Sensor** (קשר את החיישן שזוהה). אל תזיז את המשדר החכם ממיקום החיישן שלך עד אשר סימן האישור השלישי יוצג.

3. לאחר שהמשדר החכם והחיישן קושרו בהצלחה, מסך **LINKED SENSOR** (חיישן מקושר) יציג את מספר הזיהוי של החיישן.

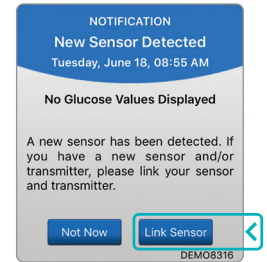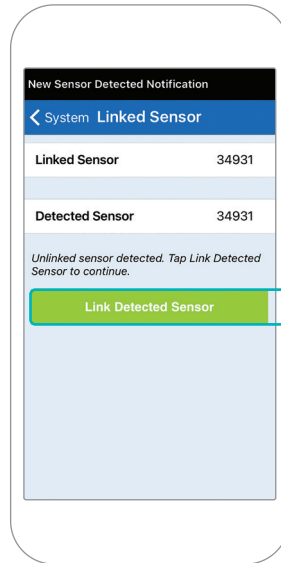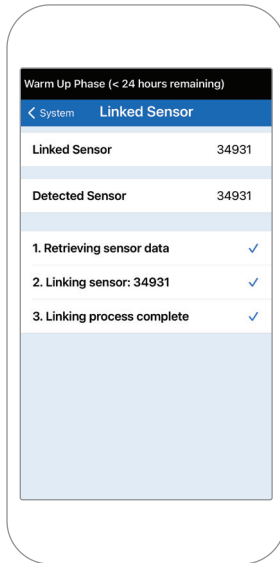

שלב חימום

שלב החימום בן 24 השעות מתחיל לאחר שקישרת את החיישן שלך. כבה את המשדר החכם ואל תניח אותו על הזרוע שלך עד לסיום שלב החימום בן 24 השעות. לחיישן נדרשות 24 שעות כדי להתייצב בגופך לפני שהמשדר החכם ייחשב את ערכי הסוכר. אם תחליט לשאת את המשדר החכם מעל מיקום החיישן בתקופה זו, אתה תקבל מסר באפליקציה המראה שתקופת החימום נמצאת בעיצומה.


למידע נוסף, אנא עיין בחלק שנקרא *לחייל את המערכת במדריך למשתמש במערכת Eversense E3 CGM*.

נשיאת משדר יומית וכיול המערכת



לאחר השלמת שלב החימום מתחיל שלב האתחול ואתה מוכן להתחיל לשאת את המשדר החכם. בימים הראשונים, אתה תישא את המשדר החכם מעל תחבושת ה-Tegaderm™. תמיד יש להתחיל עם משדר חכם אשר נטען לאחרונה.

נשיאת משדר יומית

1. קלף את החלק האחורי מנייר עם לוגו Eversense עליו והנח את המשדר החכם במרכז.

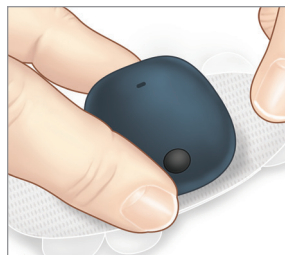


2. הסר את החלק האחורי הגדול יותר ומקם את המשדר החכם הישר מעל לחיישן.

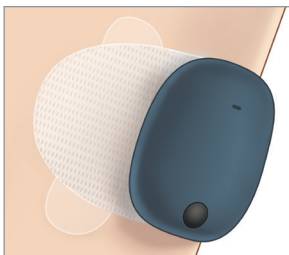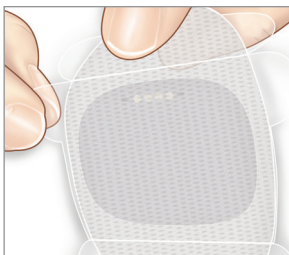


3. בדוק את החיבור בין המשדר החכם והחיישן.

בחר **Placement Guide** (מדריך מיקום) מן התפריט הראשי הנפתח על מנת לעזור לך לקבוע היכן להניח את המשדר החכם.


החלק את המשדר החכם מעל לאזור החדרת החיישן עד אשר אתה מקבל אות טוב או חזק באפליקציה.

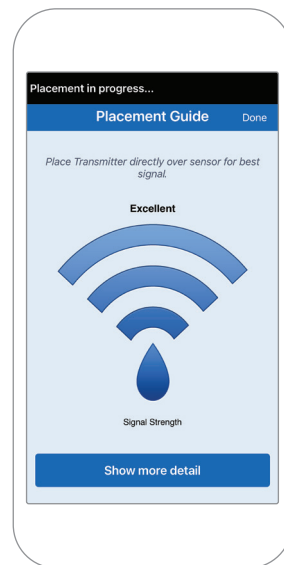

4. לחץ על המדבקה הדביקה בחוזקה מעל לשטח העור מעל לחיישן.

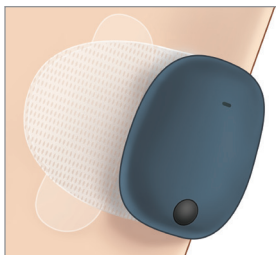

5. השתמש בלשונית על מנת לקלף את הנייר שנותר.

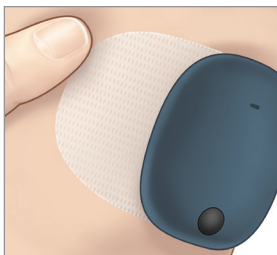

הערה: למידע נוסף על השימוש במדריך המיקום, אנא ראה **Placement Guide - Show More Detail Screen** (מדריך מיקום - מסך הראה פרטים נוספים) בחלק **Linking the Sensor** (לקשר את החיישן) במדריך למשתמש במערכת **Eversense E3 CGM**.


שלב אתחול

בערך 10 דקות לאחר התחלת שלב האתחול, המערכת תציג את הודעת **Calibrate Now** (כייל עכשיו).

- בצע בדיקת סוכר בדם מן האצבע.

▶ הקש על **Calibrate** (כיול) בהודעה והזן את ערך הסוכר אל תוך האפליקציה.

- אתה תקבל עוד 3 הודעות כיול במהלך שלב האתחול, כל שעתיים לאחר הכיול האחרון שהושלם. אתה יכול להשלים 4 כיולים בזמן מהיר של 6 שעות. יש להשלים את כל 4 הכיולים במהלך 36 שעות. אתה יכול לתעד את הזמנים למטה לעיון.

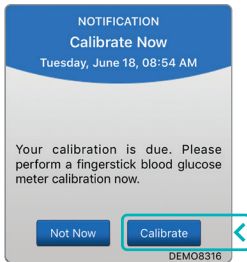

זמני כיול לאתחול

שלב חימום מסתיים: _____

#1 _____ בוקר/אח"צ #2 _____ בוקר/אח"צ*

#3 _____ בוקר/אח"צ #4 _____ בוקר/אח"צ*

*נתוני סוכר זמינים לאחר הכיול השני

עצות לכיול

- שטוף ויבש ביסודיות את הידיים.
- הימנע מלבצע בדיקת כיול כאשר רמות הסוכר עלולות להשתנות במהירות (כגון לאחר ארוחות, לאחר מתן אינסולין או במהלך פעילות גופנית).
- השתמש תמיד בערך אמיתי של סוכר בדם, והזן את הכיול לאחר 10 דקות.
- שמור את המשדר החכם במקומו מעל לחיישן 5 דקות לפני ו-15 דקות אחרי כל כיול.




שימוש יומיומי

לאחר סיום שלב האתחול, המערכת דורשת שני כיולים בכל יום עבור 21 הימים הראשונים. לאחר 21 ימים, המערכת תבקש ממך להזין ערכי כיול פעם או פעמיים ביום. אנא עיין בחלק *Calibrating the System* (לכייל את המערכת) במדריך למשתמש במערכת *Eversense E3 CGM* למידע נוסף.

ביצוע של החלטות טיפול עם Eversense E3

עבור החלטת טיפול, עליך לקחת בחשבון:


- מידע בשורת המצב.
- ערך סוכר נוכחי של החיישן – ערך הסוכר הנוכחי אמור להיות מוצג בצבע שחור.
- חץ מגמה – חץ מגמה צריך להיות מוצג.
- מידע מגמה מעודכן והתרעות.

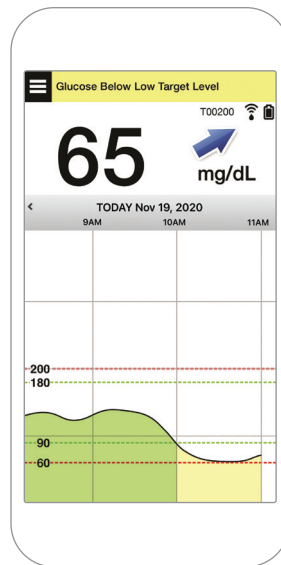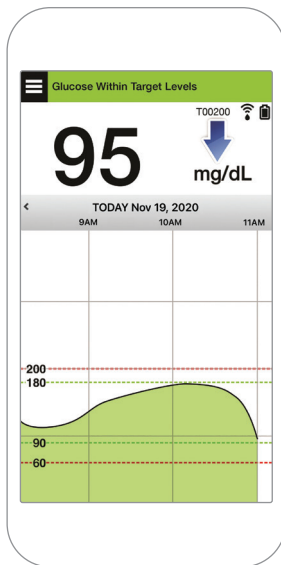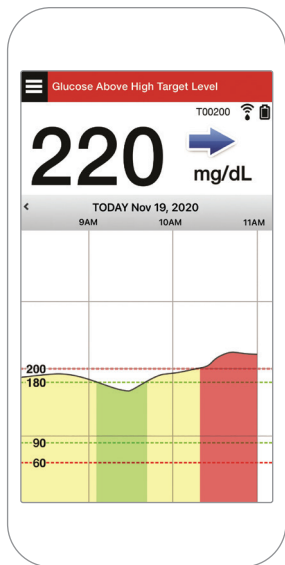

מתי אין לבצע החלטות טיפול:

- לא מוצג ערך סוכר.
- לא מוצג חץ מגמה.
- התסמינים שלך לא מתאימים למידע הסוכר המוצג.
- ערך סוכר נוכחי של החיישן מוצג בצבע אפור.
- סרגל המצב מוצג בצבע כתום.
- אתה נוטל תרופות מסוג טטרציקלין.


הערה: התייחס תמיד אל מידע הסוכר באפליקציית ה-Eversense CGM שלך על גבי הטלפון החכם שלך עבור ביצוע של החלטות טיפול. אין להשתמש בתצוגה משנית כגון שעון אפל או Eversense NOW.

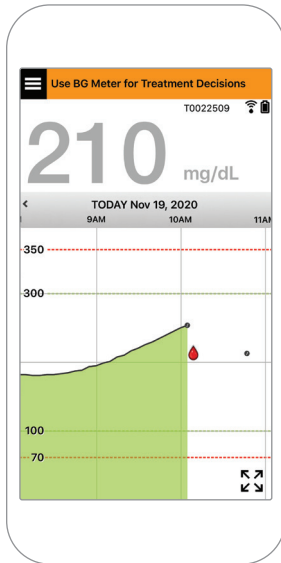

מתי יש להשתמש במד סוכר בדם שלך

אין לקחת החלטות טיפול ממערכת ה-E3 Eversense CGM אם:

⊘ No. Symptoms don't match the app.

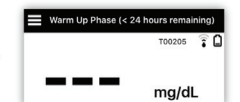

⊘ No.



⊘ No.

- התסמינים שלך לא מתאימים לערך הסוכר שלך בחיישן.

- לא מוצגים נתוני סוכר או חצי מגמה.

Use BG Meter[®] for Treatment

“Decisions” (השתמש

במד לסוכר בדם עבור החלטות טיפול) מופיע על גבי שורת המצב


במסך הבית My

Glucose (הסוכר שלי).

- אתה נוטל תרופה מסוג טטרציקלין.

השתמש בכל מידע CGM זמין

שורת מצב

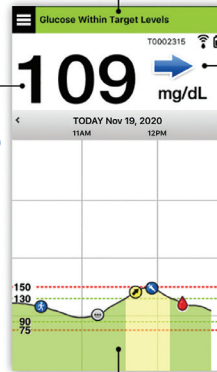

ערך סוכר

חץ מגמה

מידע מגמה מעודכן והתרעות

משאבים נוספים: מדריך למשתמש במערכת E3 Eversense CGM: השימוש באפליקציה

ניהול הסוכרת שלך

הבן את חצי המגמה שלך – דבר זה יכול לעזור לך לקחת החלטות מיועדות יותר בנוגע לסוכרת שלך.

הסוכר יציב – השינוי הוא פחות מ-1 מ"ג/ד"ל לדקה. שינוי של 0-30 "נקודות" בתוך 30 דקות.	
הסוכר עולה בהדרגה – בין 1-2 מ"ג/ד"ל לדקה. עלייה של 30-60 "נקודות" בתוך 30 דקות.	
הסוכר יורד בהדרגה – בין 1-2 מ"ג/ד"ל לדקה. ירידה של 30-60 "נקודות" בתוך 30 דקות.	
הסוכר עולה במהרה – גדול מ-2 מ"ג/ד"ל לדקה. עלייה של 60 "נקודות" או יותר בתוך 30 דקות.	
הסוכר יורד במהרה – גדול מ-2 מ"ג/ד"ל לדקה. ירידה של 60 "נקודות" או יותר בתוך 30 דקות.	


להבין רמות סוכר מהחיישן אל מול רמות סוכר בדם

- החיישן שלך מודד רמות סוכר בנוזל הנמצא ברקמת העור שלך – הנקרא נוזל בין-תאי. מד הסוכר שלך בדם (BG) מודד רמות סוכר בדם.
- רמות הסוכר בנוזל הבין-תאי ורמות הסוכר בדם קרובות בדרך כלל. כיול נכון של המערכת שלך הוא הדרך הטובה ביותר להבטיח שרמות אלו תהיינה קרובות ככל שניתן.
- הבדלים בין רמות הסוכר בנוזל הבין-תאי ורמות הסוכר בדם ניכרים במיוחד כאשר מתבצעים שינויים מהירים ברמת הסוכר בדם (לאחר אכילה, קבלת מנת אינסולין או פעילות גופנית), ואצל חלק מהאנשים, במהלך הימים הראשונים לאחר ההחדרה עקב זיהום העלול להיגרם כתוצאה מהליך ההחדרה.
- בדרך כלל, ההבדל אותו רואה ברמות הסוכר מהחיישן "מאחר" ביחס לרמות הסוכר בדם בכמה דקות.

השימוש באפליקציה הניידת

אפליקציית Eversense

מסך MY GLUCOSE (הסוכר שלי) יציג את נתוני הסוכר שלך לאחר החדרת החיישן שלך ולאחר שהתחלת לנייל את המערכת.

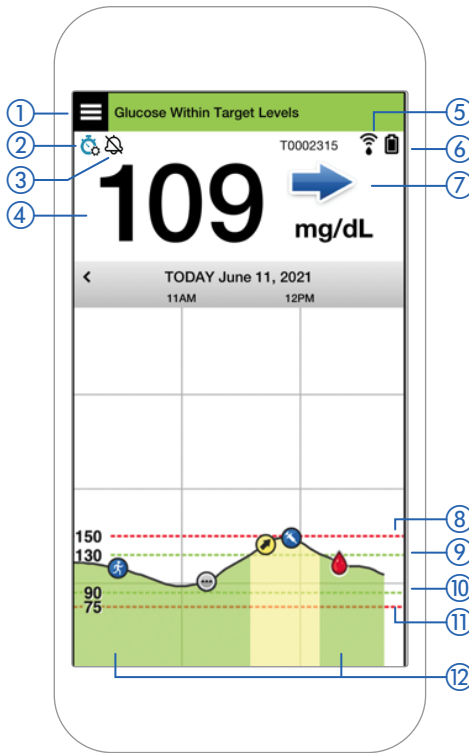

① סמל התפריט (עיין בעמוד הבא)

② סמל פרופיל זמני

③ סמל 'נא לא להפריע'

④ קריאת סוכר נוכחית

⑤ חיבור המשדר החכם אל החיישן

⑥ עוצמת הסוללה של המשדר

⑦ חץ מגמה

⑧ התרעת רמת סוכר גבוהה

⑨ יעד רמת סוכר גבוהה



⑩ יעד רמת סוכר נמוכה

⑪ התרעת רמת סוכר נמוכה

⑫ סמל יומן אירועים


אינסולין  פעילות גופנית 

כיוול  מספר רב של אירועים 

התרעת סוכר גבוה 
חזוי 

סמל התפריט

לחץ על סמל **MENU** (תפריט) (☰) בחלק העליון השמאלי בכל מסך על מנת לגלוש לכל אחת מאפשרויות התפריט הזמינות:

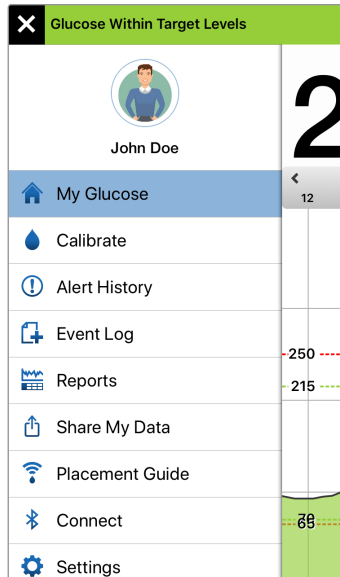

תפריט ראשי



- My Glucose (הסוכר שלי)
- Calibrate (כייל)
- Alert History (היסטוריית התרעות)
- Event Log (יומן אירועים)
- Reports (דוחות)
- Share My Data (שתף את הנתונים שלי)
- Placement Guide (מדריך מיקום)
- Connect (התחבר)
- Settings (הגדרות)
- About (אודות)


התרעות

- הן המכשיר הנייד והן המשדר החכם מציגים התרעות כדי להודיע לך מתי קריאות ה-CGM הגיעו להגדרות התרעה מסוימות או כאשר מערכת CGM דורשת תשומת לב.
- עיין במדריך למשתמש במערכת *Eversense E3 CGM* לקבלת פירוט מלא של ההתרעות באפליקציה.

שורת המצב של האפליקציה



- **Warm-up Phase** (שלב חימום) – קורה לאחר קישור המשדר החכם אל החיישן בפעם הראשונה.

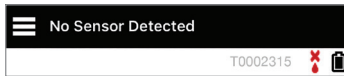

- **No Sensor Detected** (לא אותר חיישן) – יופיע בכל פעם כאשר אתה מסיר את המשדר החכם שלך מן החיישן שלך.

המשדר פועלאך לא
נמצא מעל לחיישן




- **No Transmitter Connected** (ללא משדר מחובר) – יופיע כאשר המשדר החכם כבוי, נמצא בעריסת הטעינה או נמצא מחוץ לטווח המכשיר הנייד שלך.

המשדר כבוי





- **Use BG Meter for Treatment Decisions** (השתמש במד לסוכר בדם עבור החלטות טיפול) – יופיע כאשר יש צורך ליטול בדיקה מאשרת של רמת סוכר בדם מן האצבע לפני קבלת החלטת טיפול.

עצה: התרעת **"No Sensor Detected"** (לא אותר חיישן) עלולה להופיע באפליקציה שלך. הדבר יקרה אם המשדר החכם שלך פועל, אך לא נמצא על הזרוע שלך. בטל את ההתרעה על ידי הקשה על **Not Now** (לא עכשיו).

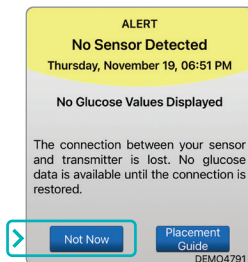


הגדרות מותאמות אישית

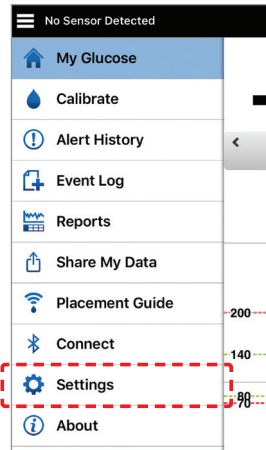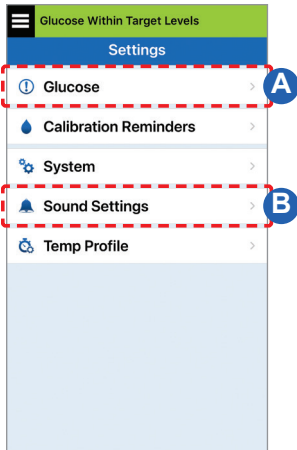


B קבע באיזו תדירות התרעה חוזרת על עצמה (נמנמ)

צילי ההתרעות שלך ניתנים להתאמה אישית עיין בחלק *Customizing Your Settings* (התאם אישית את ההגדרות שלך) במדריך למשתמש במערכת *Eversense E3 CGM*.

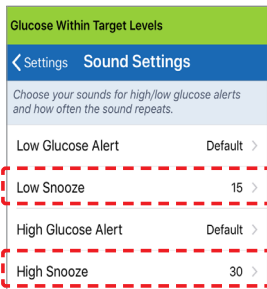


A קבע יעדי סוכר והתרעות סוכר

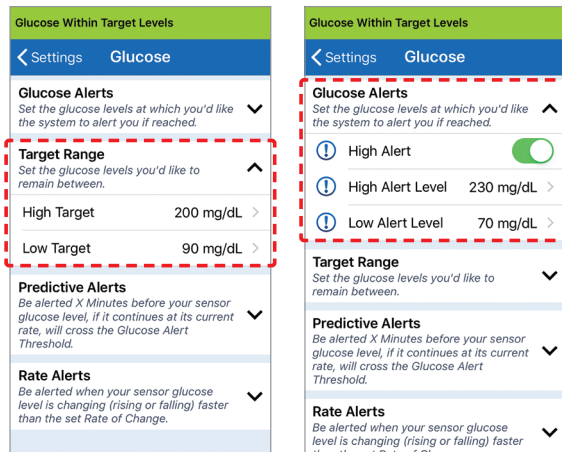

עצה: אם אתה משתמש חדש במערכת לניטור סוכר רציף (CGM), חכה עד שתקבע התרעות חזיו או שיעור שינוי עד אשר תתרגל לשאת את המערכת שלך.


התרעות והודעות – לראות, לשמוע, להרגיש

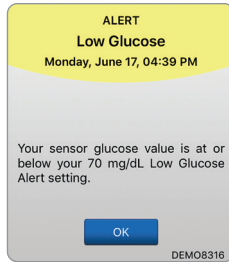

עיון בחלק *Alert Descriptions* (תיאורי התרעות) במדריך למשתמש למערכת Eversense E3 CGM למידע נוסף.

על מנת להיכנס אל היסטוריית ההתרעות:

Menu > Alert History (תפריט < היסטוריית התרעות) • התרעות ניתן למיין.

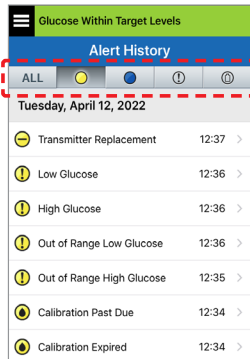

תבנית רטט במשדר החכם	התרעות והודעות
3 רטטים ארוכים	התרעות כאשר אין אפשרות להציג ערכי סוכר או התרעת שגיאת סוללה
3 רטטים קצרים X 3	התרעות הקשורות לרמות סוכר נמוכות
3 רטטים קצרים	התרעות הקשורות לחיזוי נמוך ורמות סוכר נמוכות מחוץ לטווח
רטט ארוך אחד ולאחר מכן 2 רטטים קצרים	התרעות הקשורות לרמות סוכר גבוהות
3 רטטים מהירים ולאחר מכן 2 רטט אחד ארוך X 2	התרעות הקשורות לטעינה נמוכה של המשדר החכם ועוצמת מתח נמוכה של סוללת המשדר החכם
רטט אחד קצר	התרעות הקשורות לעניינים פחות קריטיים, או הודעות

עצה: אם אתה מקבל התרעת תאורת רקע (שכיחה יותר בשלבי הנשיאה הראשונים), נסה לזוז מאור ישיר, כסה את המשדר החכם עם בגדים כהים יותר, או הנח את המשדר החכם טיפה גבוה יותר על הזרוע מעל לחייון.

כניסה אל חשבון ה-DMS שלך

אתה תמיד מחובר לחשבון שלך דרך אפליקציית Eversense, אבל בכדי לקבל גישה מלאה לכל הנתונים שלך עבור אל: <https://www.eversensedms.com> והזן את פרטי הכניסה שלך. זכור שפרטי ההתחברות שלך הם אותם פרטים בהם השתמשת כאשר יצרת את חשבון ה-Eversense שלך.

שם משתמש: _____

ססמה: _____

מספר מרפאת הצוות הרפואי: _____

הערות: _____

הערה: על מנת לשתף את נתוני Eversense DMS שלך עם הצוות הרפואי שלך, בקש מהם לספק את מספר מרפאת Eversense שלהם. עיין במדריך למשתמש Eversense DMS הכלול בערכת המשדר החכם Eversense שלך.

פרטי קשר

- צור קשר עם איש הצוות הרפואי שלך אם יש לך שאלות או חששות בנוגע לתכנית הטיפול עבור מחלת הסוכרת שלך.
- צור קשר עם צוות התמיכה בלקוחות של Eversense אם יש לך שאלות טכניות אודות מערכת Eversense E3 CGM.
- עבור הגרסה העדכנית ביותר של המדריך לעיון מהיר, בקר בכתובת <https://global.eversenseddiabetes.com>.

:Basic UDI/DI

081749102FG3500T8 ערכת משדר חכם: Eversense E3 -

081749102FG6400TQ ערכת מדבקות: Eversense E3 -

081749102FG6501TX עריסת טעינה: Eversense -

081749102FG5101T4 אפליקציית Eversense למכשירים ניידים מסוג iOS: -

081749102FG5301TE אפליקציית Eversense למכשירים ניידים מסוג אנדרואיד: -

Call 04-6175390 for Customer Support.

Distributed by:

DYN Diagnostics Ltd.

7 Ha'eshel St. P.O. Box 3063

Caesarea Industrial Park 3079504, Israel

Phone: 04-6175390

Email: patient.care@dyn.co.il

שם הרישום באמ"ר:

מערכת לניטור סוכר רציף Eversense E3

Eversense E3 Continuous Glucose Monitoring System

מס' רישום: 2660816

שם היצרן וכתובתו: סנסאניקס, אינק. סניקה מדווס

פארקווי 20451, גרמנטאון, מרילנד 20876-7005, ארה"ב

פרטי בעל הרישום, היבואן והמפיץ בישראל:

דין דיאגנוסטיקה בע"מ

רח' האשל 7, פארק תעשייה דרומי קיסריה, 3079504

04-6175390

patient.care@dyn.co.il

התקשר אל 04-6175390 עבור שירות לקוחות.



Senseonics, Inc.

20451 Seneca Meadows Parkway

Germantown, MD 20876-7005 USA

global.eversenseddiabetes.com



פטנטים: www.senseonics.com/products/patents

Senseonics

Apple App Store ו-Google Play והמוצרים

שלהם הם סימני מסחר או זכויות יוצרים של

בעליהם, בהתאמה.



Emergo Europe

Westervoortsedijk 60

6827 AT Arnhem

The Netherlands



(241) LBL-4203-43-001_REV_F



Dimensions

Trim: 6.75" w x 5.8" h

Bleed: 0.125"

Folded *(Include folded dimensions if applicable)*:**Colors:** 4/colorSpot *(Name PMS colors if applicable)*: N/A**Paper Weight:**

Cover: 65# Gloss Cover

Text: 60# Gloss Text