



Continuous Glucose Monitoring System

מערכת לניהול נתונים (DMS) מדריך למשתמש



Eversense ולוגו Eversense הם סימנים מסחריים של Senseonics, Incorporated. מותגים אחרים והמוצרים שלהם הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של בעליהם החוקיים.

Eversense DMS אינה מכילה תכנות זדוניות או וירוסים אשר עלולים להזיק למחשב שלך. מומלץ השימוש בתכנת 'חומת אש' מתאימה ותכנת אנטי-וירוס על גבי המחשב שלך על מנת למנוע חדירה של תכנות זדוניות ושל וירוסים.

על מנת לקרוא את מדיניות הפרטיות של Eversense, בקר באתר global.eversenseddiabetes.com.

תוכן העניינים

34	דוח התפלגות הסוכר	4	רשימת מונחים.....
36	דוח יומן משדר	6	1. מבוא.....
39	4. Settings (הגדרות).....	6	השימוש המיועד
39	סוכר	7	הסכם רישיון עבור משתמש קצה ומדיניות פרטיות
41	דוח סיכום	7	עזרה ותמיכה
43	5. Transmitter (משדר).....	8	2. תחילת השימוש.....
43	העלה נתוני מכשיר	9	צור חשבון חדש
	6. Data Share (שיתוף נתונים).....	10	היכנס אל המערכת
51	DMS Pro	11	שכחת את הססמה שלך
51	הזמנה של המרפאה שלך	12	הפרופיל שלך ותפריט הגלישה
52	הזמנה מן המרפאה שלך	13	פרופיל
52	הסרה של המרפאה שלך	15	תפריט גלישה
	7. Help (עזרה).....	17	קביעת טווח תאריכים
53	אודות	18	תמונת מצב Eversense DMS עם AGP
53	צרו אתנו קשר	23	3. Reports (דוחות).....
54	נטרל את החשבון שלי	25	זמן בתוך היעד
54	שחרר הערות	26	זמן בתוך הטווח
		28	דוח נטיית השינוי של הסוכר
		30	דוח מגמת הסוכר
		32	דוח היסטוריית הסוכר

EULA הסכם רישיון עבור משתמש קצה.

אפליקציית Eversense תוכנה שמותקנת במכשיר נייד ומשמשת להצגת נתוני סוכר CGM הנשלחים מהמסדר החכם.

אפליקציית הלקוח של Eversense אפליקציית מחשב המאפשרת למשתמשי Eversense להעלות את הנתונים הקיימים על גבי המסדר החכם שלהם אל המערכת לניהול נתונים על ידי שימוש בכבל USB.

המערכת לניהול הנתונים של Eversense (DMS) אפליקציה מבוססת אינטרנט התואמת לאפליקציית Eversense שבה נתוני הסוכר שלך מאוחסנים וניתנים לצפייה.

נוזל בין-תאי (ISF) הנוזל הנמצא בין תאי הגוף. ה-CGM Eversense מודד את רמת הסוכר מנוזל בין-תאי, בניגוד לרמת הסוכר בדם המושגת באמצעות בדיקת דם מהאצבע.

סנכרון אוטומטי כאשר תכונה זו מופעלת באפליקציית Eversense עבור המכשיר הנייד, נתוני הסוכר וההגדרות שלך יסונכרו עם ה-Eversense DMS בכל שעותיים.

סוכר בדם ערך הסוכר שהושג מבדיקת סוכר באצבע.

מד סוכר בדם מכשיר הזמין באופן מסחרי המשמש למדידת רמת הסוכר על ידי שימוש בדגימת דם מהאצבע.

כיול קריאת רמת סוכר בדם מהאצבע מוזנת אל תוך אפליקציית Eversense על מנת לבדוק את דיוק המערכת. עם מערכת ה-Eversense, ישנם שני שלבים: שלב האתחול שבמהלכו יש לבצע 4 דגימות דם מהאצבע, ושלב הכיול היומי, שבמהלכו נדרשת דגימת דם מהאצבע פעם או פעמיים ביום.

CGM ניטור סוכר רציף. ניטור רציף של רמות הסוכר מהנוזל הבין-תאי מדי כמה דקות.

התוויית נגד מצבים או נסיבות בהם אדם איננו יכול להשתמש במכשיר.

משדר חכם מכשיר לשימוש רב-פעמי שנישא באופן חיצוני מעל החיישן המיוחד, מפעיל את החיישן ושולח את נתוני הסוכר למכשיר נייד לתצוגה באפליקציית Eversense.

מ"ג/ד"ל מיליגרמים לדציליטר, יחידת מידה המראה ריכוז חומר מסוים בכמות נוזלים ספציפית. בחלק מן המדינות, כולל בארצות הברית, תוצאות בדיקות הסוכר מדווחות ב-מ"ג/ד"ל, דבר המראה את רמת הסוכר בדם כאשר נעשה שימוש במד סוכר בדם, או את רמת הסוכר בנוזל בין-תאי כאשר נעשה שימוש בכמה מערכות CGM, כגון מערכת ה-Eversense CGM.

ממו"ל/ל" אלפיות מול לליטר, יחידת מידה המראה ריכוז חומר מסוים בכמות נוזלים ספציפית ממו"ל/ל" - מילימולים לליטר, טר, יחידת מידה המראה ריכוז חומר מסוים בכמות נוזלים ספציפית. בחלק מן המדינות, תוצאות בדיקות הסוכר מדווחות ב-ממו"ל/ל", דבר המראה את רמת הסוכר בדם כאשר נעשה שימוש במד סוכר בדם, או את רמת הסוכר בנוזל בין-תאי כאשר נעשה שימוש בכמה מערכות CGM, כגון מערכת ה-Eversense CGM.

סוכר חיישן ערך הסוכר שהושג מחיישן Eversense.

חיישן התקן המיוחד מתחת לעור עבור מדידה רציפה של רמות הסוכר בנוזל הבין-תאי.

השימוש המיועד

המערכת לניהול נתונים של Eversense (DMS) מיועדת לשימוש כאביזר למוצרי Eversense CGM תואמים. זוהי אפליקציה מבוססת אינטרנט שניתנת לשימוש על מנת לראות, לנתח ולאחסן נתוני סוכר ממערכת ה-Eversense CGM שלך.

Eversense DMS מתאימה ל:

- Internet Explorer
- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Safari

הערה:

- למידע נוסף על דפדפנים וגרסאות דפדפן תואמים, אנא בקר global.eversenseddiabetes.com/compatibility.
- בדוק באתר www.eversenseddiabetes.com עבור עדכונים סדירים לדרישות הדפדפן שלך.

חשוב: המערכת לניהול הנתונים של EVERSENSE איננה מספקת עצות רפואיות. אין לקבל החלטות טיפול מבלי להתייעץ עם הצוות הרפואי שלך.

הסכם רישיון עבור משתמש קצה ומדיניות פרטיות

השימוש ב-Eversense DMS כפוף לתנאים ולהתניות של הסכם הרישיון למשתמש קצה העדכני ביותר של אפליקציית Eversense ולמדיניות הפרטיות של אפליקציית Eversense. מסמכים אלו מעודכנים מעת לעת ומוצגים באתר global.eversenseddiabetes.com.

עזרה ותמיכה

אם אינך מבין משהו במדריך למשתמש זה של DMS, צור קשר במספר הטלפון (844-736-7348) או 844-SENSE4U. אם אתה נמצא מחוץ לארה"ב, צור קשר עם המפיץ המקומי או בקר באתר global.eversenseddiabetes.com על מנת לראות מיהו המפיץ המקומי באזורך.

2. תחילת השימוש

2

ה-Eversense DMS היא אפליקציה מבוססת דפדפן אינטרנט (אפליקציית אינטרנט) המאפשרת לך להעלות באופן אוטומטי את הנתונים מאפליקציית Eversense הניידת שלך מן המכשיר החכם התואם אל האינטרנט עבור אחסון ממושך וסקירה.

תכנת המחשב מאפשרת למחשב שלך לתקשר ישירות עם אפליקציית האינטרנט. אתה יכול גם להעלות את הנתונים שלך ישירות מן המשדר החכם אל חשבון ה-Eversense DMS שלך באמצעות חיבור כבל על ידי הורדה והתקנה של תכנת המחשב ללקוח Eversense היישר אל המחשב האישי שלך.

צור חשבון חדש

לפני השימוש ב-Eversense DMS, יהיה עליך להירשם כמשתמש.

אם כבר יצרת חשבון באפליקציית Eversense הניידת, אין צורך ליצור חשבון חדש.

1. עבור אל global.eversensedms.com

2. הקש על "Sign Up" (הירשם)

3. הזן את המידע הנדרש

4. הקש על "Submit" (הגש)

The screenshot shows the Eversense registration page. At the top is the Eversense logo and a language selector set to 'English (UK)'. Below the logo is a progress indicator with three steps, the first being active. The form is titled 'Create New Account' and includes the following fields:

- First Name ***: Input field with placeholder 'First Name'.
- Last Name ***: Input field with placeholder 'Last Name'.
- Email ***: Input field with placeholder 'sample@email.com'.
- Create a password ***: Input field with placeholder 'Eg. abc@1A'.
- Confirm your password ***: Input field with placeholder 'Eg. abc@1A'.

At the bottom right of the form is a blue 'Next' button. Below the form, there is a link: 'Have account already? Please go to [Sign In](#)'. At the very bottom, a copyright notice reads: 'Copyright © 2022 Senseonics® All rights reserved.'

This screenshot shows a different view of the Eversense registration page. The Eversense logo is at the top. Below it is a language selector set to 'English (UK)'. A link that says 'Need an Account? **Sign Up**' is highlighted with a red box. Below this are two input fields: 'Email *' with placeholder 'sample@email.com' and 'Password *' with placeholder 'Password'. A note below the password field says '* Mandatory field'. A blue 'Sign In' button is located below the password field. At the bottom, there are two links: 'Forgot your Password?' and 'Problem logging in? [Contact Us](#)'. At the very bottom, it says 'To sign in to Eversense DMS Pro click [here](#)'.

הערה: אתה תתבקש לקבוע שאלה סודית לבטיחות נוספת לאחר שתיכנס אל המערכת בפעם הראשונה. ניתן להשתמש כעת בכתובת הדוא"ל והססמה שהזנת כנתוני כניסה אל חשבון ה-Eversense DMS ואל כל מוצרי ה-Eversense האחרים.

English (UK) ▾

Need an Account ? [Sign Up](#)

Email *

sample@email.com

Password *

Password

* Mandatory field

Sign In

[Forgot your Password?](#)

Problem logging in? [Contact Us](#)

To sign in to Eversense DMS Pro click [here](#)

היכנס אל המערכת

בכל פעם בה תרצה להשתמש ב-Eversense DMS אתה תצטרך להיכנס אל המערכת.

1. עבור אל global.eversensedms.com

2. בעמוד הכניסה אל המערכת, הזן את כתובת הדוא"ל ואת הססמה


3. הקש על "Sign In" (היכנס אל המערכת)

חשוב: אם יהיו לך יותר משלושה ניסיונות כושלים להיכנס אל המערכת, חשבון ה-Eversense DMS יינעל למשך 30 דקות.


הערה: אם אינך פעיל באתר DMS לפרק זמן של עד שעה אחת, אתה תקבל חלון מוקפץ אשר יורה לך לבחור "Continue" (המשך) אם תרצה להישאר בתוך המערכת.

שכחת את הססמה שלך

אם שכחת את הססמה שלך עבור הכניסה אל המערכת, אתה יכול ליצור בקלות ססמה חדשה.

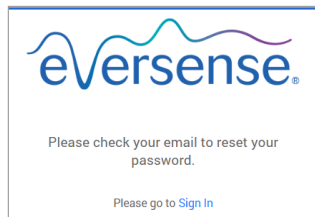


מסר יוצג על מנת ליידע אותך שהודעת דוא"ל נשלחה אליך עם הוראות לאיפוס הססמה שלך.

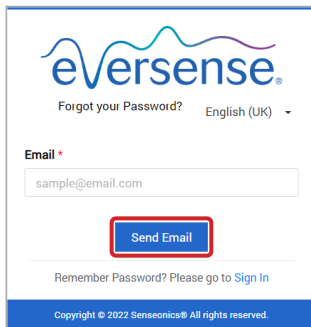


1. הקש על "Forgot your password" (שכחת את הססמה שלך) בעמוד הכניסה אל המערכת

2. הזן את כתובת הדוא"ל שלך כאשר תתבקש לעשות זאת

3. הקש על "Send Mail" (שלח הודעת דוא"ל)

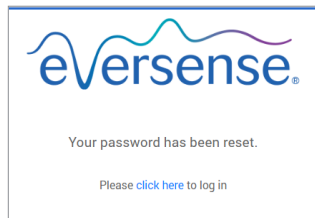

מסר יופיע, המאשר שהססמה אופסה. בחר בקישור "click here" (הקש כאן) על מנת לחזור אל עמוד הכניסה אל המערכת.

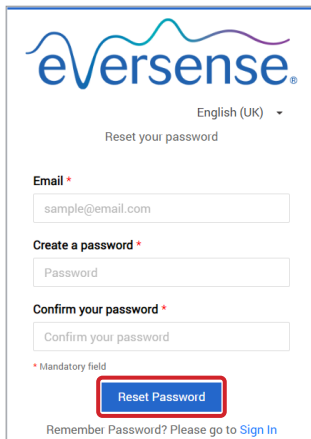

4. פתח את הודעת הדוא"ל והקש על הקישור לאתר אתה תגיע היישר אל עמוד אינטרנט שבו תיצור ותאשר ססמה חדשה.

5. הקש על "Reset Password" (אפס ססמה)

הפרופיל שלך ותפריט הגלישה

לאחר כניסה מוצלחת אל המערכת, לוח מחוונים עם AGP יוצג.

- בפינה הימנית העליונה של העמוד אתה יכול להיכנס אל מידע ה-Profile (פרופיל) שלך.
- בפינה השמאלית העליונה תוכל לראות **Navigation Menu** (תפריט גלישה).

The screenshot shows the Eversense CGM dashboard. On the left, a navigation menu is highlighted with a red box, containing: Dashboard, Reports, Settings, Transmitter, Data Share, and Help. At the top right, the user's profile information is highlighted with a red box, showing the email address jeangarc97@gmail.com. The main dashboard area displays 'Eversense Wear Time' at 20.56%, a 'Period' of Jan 13 2022 - Apr 12 2022, and a table of 'System Information' and 'Glucose Settings'.

System Information		Glucose Settings	
Transmitter: 35248	Target	Low: 79 mg/dL	High: 140 mg/dL
Sensor: 262344	Alert	Low: 70 mg/dL	High: 200 mg/dL


פרופיל

כאשר היא ממוקמת בפינה הימנית העליונה של תמונת המצב תכונה זו מאפשרת לך לשנות את השם או את הסממה שלך, לערוך את פרופיל המשתמש שלך או לצאת מתכנת Eversense DMS.

אם תרצה לשנות את הסממה שלך עבור הכניסה אל המערכת, אתה יכול לקבוע מחדש בקלות סממה חדשה.


1. הקש על שם המשתמש שלך

תפריט נשלף יופיע אשר יציג את תמונה הפרופיל שלך, אתה הכניסה האחרונה שלך אל המערכת ואפשרויות לראות/לערוך את הפרופיל שלך או לצאת מן המערכת.

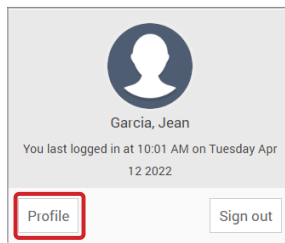

2. הקש על "Profile" (פרופיל) על מנת להיכנס אל הגדרות הפרופיל של המשתמש

3. הקש על "Change Password" (שנה סממה) על מנת להציג ולשנות את הסממה הנוכחית שלך.

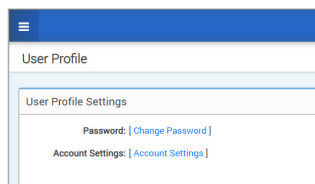

4. הזן את הסממה הנוכחית שלך

5. הזן ואשר את הסממה החדשה שלך

6. הקש על "Change Password" (שנה סממה) על מנת לשמור את השינויים שלך

על מנת לשנות את המידע האישי עבור החשבון שלך:

1. הקש על "Account Settings" (הגדרות חשבון)

2. הזן את המידע אותו תרצה לשנות

אתה יכול לשנות את תמונת הפרופיל שלך על ידי לחיצה על לחצן **Choose File** (בחר קובץ), ובחירה של תמונה מתוך הקבצים על גבי המחשב שלך. תמונת הפרופיל תשונה עבור כל מוצרי Eversense התואמים.


The screenshot shows the 'Account Settings' page with the 'Profile Details' section. The page header includes a menu icon, 'Last Sync Date : Friday Apr 01 2022 9:44 AM', 'English (UK)', and the user email 'jeangarc97@gmail.com'. The 'Profile Details' section contains the following fields:

- Profile Picture:** A circular profile picture placeholder with a 'Choose File' button and the text 'No file chosen'.
- First Name:** Text input field containing 'Jean'.
- Last Name:** Text input field containing 'Garcia'.
- Mobile Number:** Text input field containing '1234567891'.
- Date Of Birth:** Date picker field showing '10/07/2000'.
- Gender:** Dropdown menu with 'Female' selected.
- Diabetes Type:** Dropdown menu with 'Type1' selected.
- Secret Question:** Dropdown menu with 'What is the name of your first pet?' selected.
- Answer:** Text input field containing '....'.
- Show Answer:** A checkbox that is currently unchecked.


3. הקש על "Save" (שמור) על מנת לשמור את השינויים שלך.



עמוד הגדרות הפרופיל של המשתמש יופיע שוב. על מנת לחזור אל תמונת המצב הקש על "Dashboard" (תמונת מצב) בפינה השמאלית העליונה על גבי לוח הגלישה.

תפריט גלישה

בפינה השמאלית העליונה של תמונת המצב עם ה-AGP נמצא תפריט הגלישה. אתה יכול לפתוח ולסגור את תפריט הגלישה על ידי לחיצה על . הקש על כל לחצן בתפריט על מנת לגלוש אל אפשרות זו.

הערה: אתה יכול לבחור גם את השפה המועדפת עליך על ידי לחיצה על השפה.

אתה יכול להקיש על סמל  על מנת להרחיב את הבחירה בתפריט הגלישה.

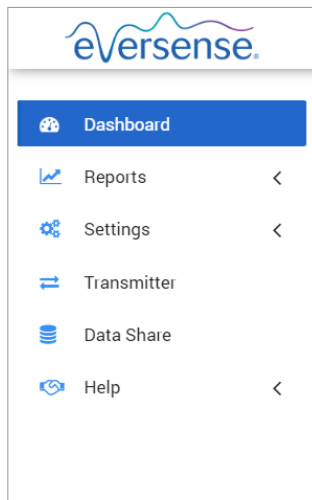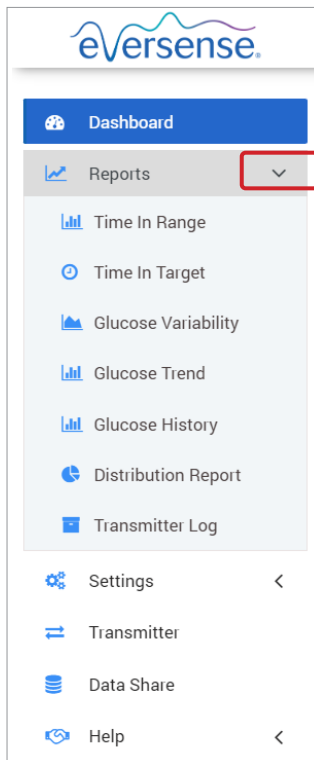

תכונות	בחירות תפריט
חזור אל תמונת מצב	Dashboard (תמונת מצב)
<p>הצג, הדפס ושתף דוחות</p> <ul style="list-style-type: none"> • זמן בתוך היעד • זמן בתוך הטווח • השתנות הסוכר • מגמת הסוכר • היסטוריית סוכר • דוח התפלגות • יומן משדר 	Reports (דוחות)
<p>הגדרות Eversense DMS</p> <ul style="list-style-type: none"> • סוכר • דוח סיכום 	Settings (הגדרות)
הורד את אפליקציית הלקוח	Transmitter (משדר)
קשר את חשבון ה-DMS אל ה-DMS Pro	Data Share (שיתוף נתונים)
<ul style="list-style-type: none"> • אודות • יצירת קשר • נטרל חשבון • שחרר הערות 	Help (עזרה)

קביעת טווח תאריכים

בחלק העליון של לוח המחוונים, אתה תמצא את האפשרויות שלך לטווח תאריכים מוגדר מראש, וכמו כן את האפשרות לקבוע טווח תאריכים מותאם אישית עבורך. הדבר ישפיע על אילו נתונים יהיו בשימוש עבור ניתוחי נתונים והדרך בה הם מוצגים בלוח המחוונים ה-AGP ובכל הדוחות האחרים.

על מנת לשנות את הגדרות טווח התאריכים שלך:

1. אם תרצה לראות נתונים אשר לא נמצאים בתוך אחד מטווחי התאריכים המוגדרים מראש, הקש על לחצן המכונה "Custom Range" (טווח מותאם אישית) על מנת להציג לוח שנה





הדבר יציג חלון מוקפץ המאפשר לך לבחור בטווח התאריכים המותאם אישית עבורך.
הערה: נתונים זמניים דרך ה-DMS יהיו בטווח של עד שנה אחת אחורנית.

2. בחר **Start Date** (תאריך התחלה) עבור הדיווח הרצוי

3. בחר **End Date** (תאריך סיום) עבור הדיווח הרצוי

4. הקש על "Ok" (אישור) בסיום

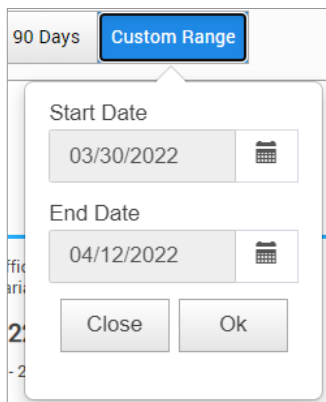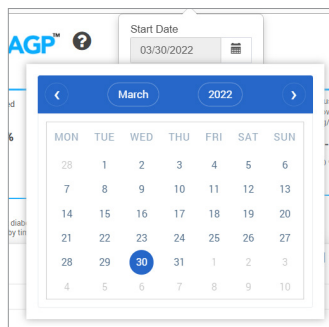

תמונת מצב Eversense DMS עם AGP

תמונת המצב של Eversense DMS הוא עמוד ברירת המחדל אותו אתה רואה בכל פעם בה שאתה נכנס אל ה-DMS. עמוד זה כולל את זמן הלבישה שלך עבור Eversense, דוחות AGP Captur ואת המידע אודות המערכת.

זמן לבישת Eversense

זמן הלבישה הוא אחוז הזמן בו נלבש המשדר החכם, במהלך טווח התאריכים אותו בחרת. 100% מהווים 23.5 שעות של זמן נשיאה של המשדר החכם בכל יום. האחוז אינו כולל זמנים בהם ערך הסוכר איננו מוצג. לדוגמה: ההתחלה של שלב האתחול או כאשר מופעלת התרעה המונעת את הצגת נתוני הסוכר.

🕒 Eversense Wear Time
21.3 %

מידע אודות המערכת: חלק ה-'מידע אודות המערכת' ממוקם בחלק התחתון של תמונת המצב AGP.


חלק זה מראה לך את:

- המספר הסידורי של המשדר
- המספר הסידורי של החיישן
- הגדרות סוכר: את הגדרות הסוכר ניתן לשנות דרך ה-DMS וגם באמצעות אפליקציית Eversense הניידת (ראה *Settings* (הגדרות) למידע נוסף).

System Information	Glucose Settings		
Transmitter: 35248	Target	Low: 79 mg/dL	High: 140 mg/dL
Sensor: 262344	Alert	Low: 70 mg/dL	High: 200 mg/dL

Eversense DMS-מ כחלק מ-Captur AGP

הדוח הראשוני של תמונת המצב Eversense DMS הוא דוח ה-Captur AGP (פרופיל סוכר אמבולטורי). דוח ה-AGP מציג נתוני סוכר בתוך 3 חלקים של הדיווח שלהם.

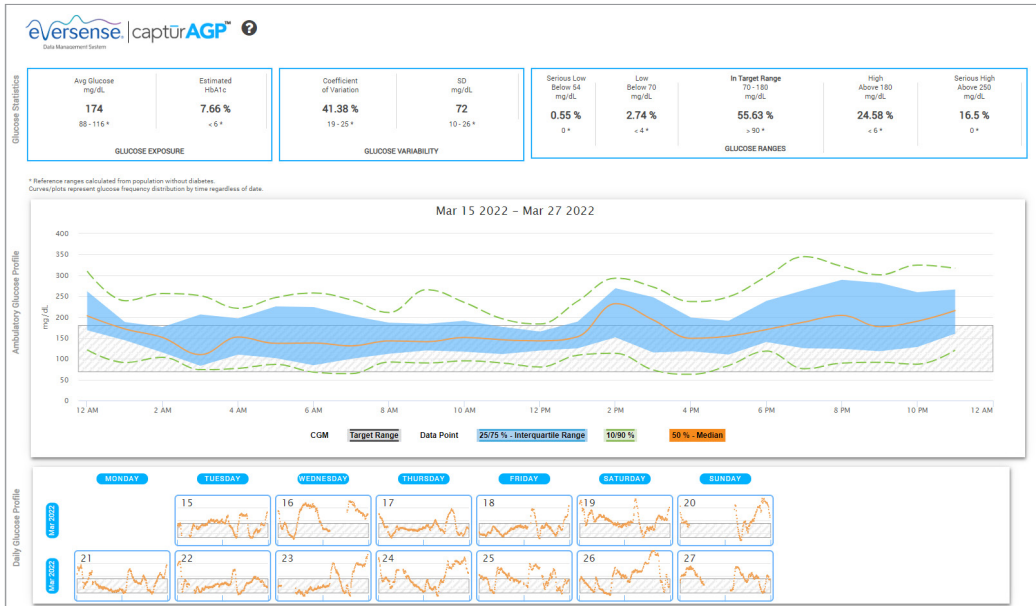

סטטיסטיקות סוכר: מידות אודות נתוני הסוכר שלך

- ממוצע סוכר (ממוצע): כל ערכי הסוכר ביחד, מחולקים למספר הקריאות
- HbA1c משוער: מחושב מתוך ערכי הסוכר AGP; יכול להיות שונה מ-A1c במעבדה בגלל תקופות זמן שונות
- טווחי סוכר: באופן אידיאלי, ערכי הסוכר נמצאים בטווח המטרה
 - נמוכים/מאוד נמוכים: מטרה – ללא ערכים נמוכים או מאוד נמוכים; הפחתה של נמוכים תגרום לך להרגיש טוב יותר
 - גבוהים/מאוד גבוהים: מטרה – ללא ערכים גבוהים או גבוהים מאוד; הפחתה של הגבוהים תגרום ל-A1c לרדת במהלך הזמן
- SD (סטיית תקן): כמה שינויים קיימים בסט הנתונים שלך; באופן אידיאלי, מספר נמוך
- CV (מקדם של שינוי): עד כמה רחוקים הערכים מן הממוצע; באופן אידיאלי, מספר נמוך

Glucose Statistics	GLUCOSE EXPOSURE		GLUCOSE VARIABILITY		GLUCOSE RANGES				
	Avg Glucose mg/dL	Estimated HbA1c	Coefficient of Variation	SD mg/dL	Serious Low Below 54 mg/dL	Low Below 70 mg/dL	In Target Range 70-180 mg/dL	High Above 180 mg/dL	Serious High Above 250 mg/dL
	174 88-116*	7.66 % < 6*	41.38 % 19-25*	72 10-26*	0.55 % 0*	2.74 % < 4*	55.63 % > 90*	24.58 % < 6*	16.5 % 0*


* Reference ranges calculated from population without diabetes.
Curves/plots represent glucose frequency distribution by time regardless of date.

פרופיל סוכר: פרופילים יומיים של סוכר משולבים בכדי להציע תמונה של יום אחד (24 שעות). באופן אידאלי, הקווים נשארים בתוך האזור האפור המוצל (טווח המטרה). יכול להיות שהקווים לא יהיו מלאים, בגלל שיכול להיות שלא תיבדק בכל שעה של היום.

כתום: קו תיכוני (אמצעי) היכן שחצי מערכי הסוכר נמצאים מעל וחצי נמצאים מתחת; באופן אידאלי, הקו הכתום הוא בעיקר שטוח ונמצא בתוך האזור האפור המוצל


כחול: האזור בין הקווים הכחולים מראה 50% מערכי הסוכר; באופן אידאלי, השטח ביניהם הוא צר

ירוק: 10% מן הערכים הם מעל (90% קו עליון) ו-10% הם מתחת (10% קו תחתון); באופן אידאלי, ככל שהקווים הירוקים קרובים יותר אל האזור האפור המוצל, כך טוב יותר

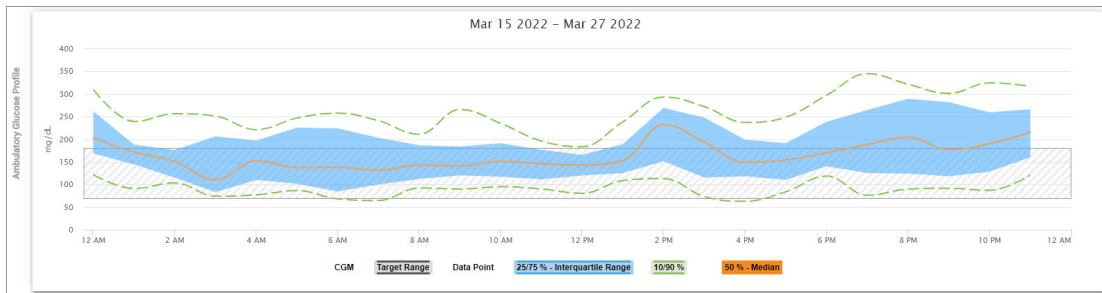

פרופילי סוכר יומיים: כל תיבה מייצגת תבנית סוכר של יממה אחת. הם יוצגו רק אם טווח התאריכים שלך נקבע ל-14 ימים או פחות.

2

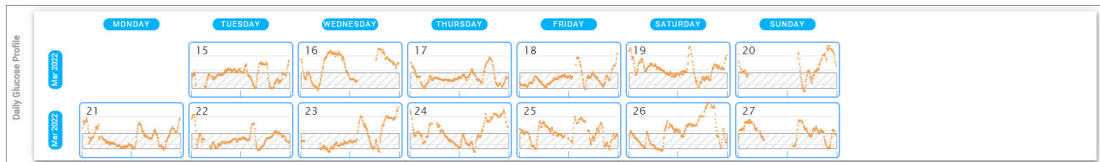

3. Reports (דוחות)




תכונת מפתח של אפליקציית Eversense DMS היא היכולת ליצור, להדפיס ולשתף דוחות מפורטים אודות היסטוריית הסוכר שלך. הדוחות מספקים דרכים מגוונות לארגן ולראות את קריאות הסוכר שלך מדקה לדקה, יום ליום, או במהלך טווח של כמה שבועות או חודשים.

הערה: אם אתה בוחר בדוח מסוים ואין נתונים אשר מוצגים, בדוק שנתוני הסוכר הועלו קודם לכן עבור טווח התאריכים הנבחר. אם עדיין לא מוצגים, צור קשר עם מחלקת שירות לקוחות.

סן, הדפס או שלח בדוא"ל את הדברים המוצגים בדוחות

בפינה הימנית העליונה של עמודי הדוח יישן אפשרויות עבור שינוי של העדפות הדוח, הדפסה של הדוח ושליחה שלו בדוא"ל.

3


			הקש
שמור דוח כ-PDF	שלח דוח בדוא"ל	שנה מסנני דוח	על מנת
<p>לחץ על הסמל על מנת להפוך את הדוח שלך לקובץ PDF המאפשר לך להדפיס את הדוח בבית.</p>	<p>עקוב אחר החלון המוקפץ המבקש ממך לשלוח דוח הניתן להדפסה לנמען נבחר.</p> <div data-bbox="306 624 651 874" style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Send Report to Email x</p> <p>To: <input type="text"/></p> <p>Subject: <input type="text" value="Glucose Variability for Jean Garcia from 01/13/2022 to 04/12/2022"/></p> <p>Attached: GlucoseVariability.pdf</p> <p>Message: <input type="text" value="Glucose Variability for Jean Garcia from 01/13/2022 to 04/12/2022"/></p> <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Send"/></p> </div>	<p>בצע בחירות על מנת לבחור אילו סוגי אירועים, ימים של השבוע ואפשרויות אחרות תופענה בדוחות, כאשר ישימות. מסנן זה איננו זמין עבור דוחות ה-AGP, זמן בתוך הטווח על פי זמן היום, או זמן בתוך היעד.</p> <div data-bbox="671 770 1044 1016" style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Report Preferences x</p> <p><input type="button" value="Event Types"/> <input type="button" value="Days of the Week"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sensor Glucose</p> <p><input type="checkbox"/> Blood Glucose</p> <p><input type="checkbox"/> Insulin</p> <p><input type="checkbox"/> Meal</p> <p><input type="checkbox"/> Exercise</p> <p><input type="checkbox"/> Health</p> <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Cancel"/> <input type="button" value="Save"/></p> </div>	איך

זמן בתוך היעד

דוח ה-'זמן בתוך היעד' מציג גרף עוגה המנתח את אחוז הזמן בו נתוני הסוכר שלך נמצאים מתחת, בתוך או מעל טווח היעד אותו קבעת בגדרות הסוכר שלך.

הצגת הדוח:

- הטריז הירוק מייצג את אחוז הזמן בו היית בתוך טווח המטרה שלך.
- הטריז האפור מייצג את אחוז הזמן בו היית מעל טווח המטרה שלך.
- הטריז האדום מייצג את אחוז הזמן בו היית מתחת טווח המטרה שלך.

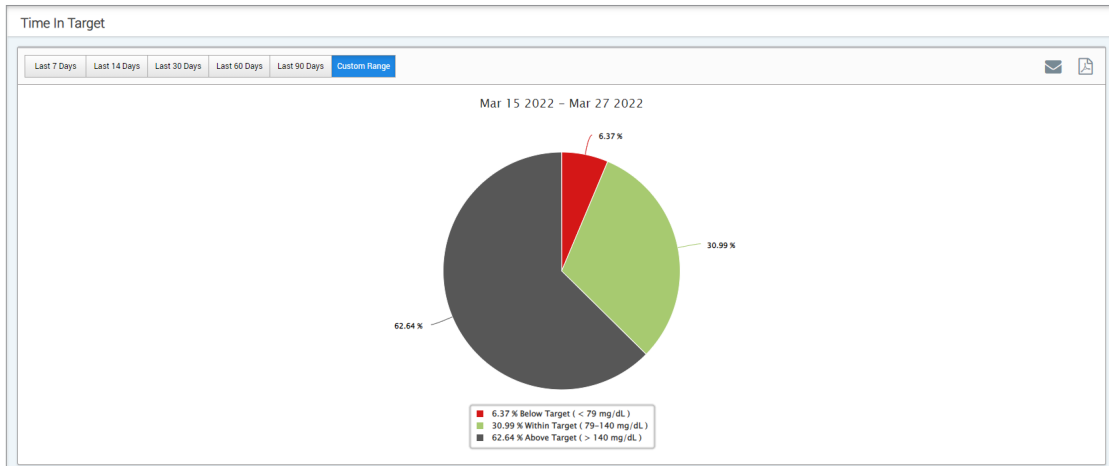


3 דוח ה-זמן בתוך הטווח על פי זמן היום' מראה סט של גרפי עמודות הבוחנות את אחוז הזמן בו הסוכר שלך היה בתוך טווחי הסוכר אשר נקבעו מראש.

- מאוד נמוך: > 54 מ"ג/ד"ל
- נמוך: 54 - 70 מ"ג/ד"ל
- בתוך הטווח: 70 - 180 מ"ג/ד"ל
- גבוה: 180 - 250 מ"ג/ד"ל
- מאוד גבוה: < 250 מ"ג/ד"ל

לדוח זה יש שני חלקים:

זמן בתוך הטווח


חלק זה מציג את אחוז הזמן הכולל שלך בו הסוכר שלך היה בתוך טווחי הסוכר אשר נקבעו מראש, על בסיס טווח התאריכים אותו בחרת.

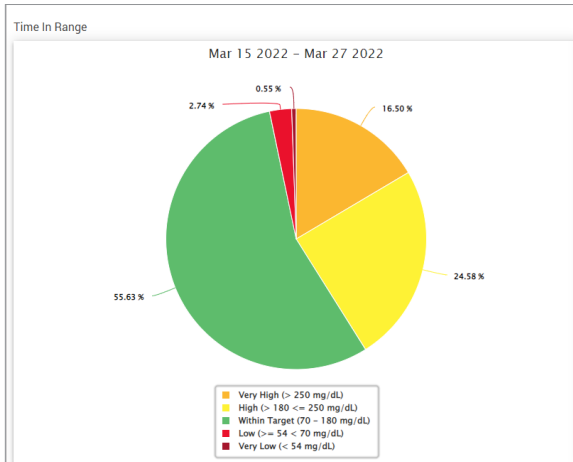

זמן בתוך הטווח על פי זמן היום

חלק זה של הדוח מציג את תרשימים 'זמן בתוך הטווח' הכללי אל חלקים שונים במהלך היום. אתה יכול לראות את הנתונים שלך בחלקים של 4 שעות, 6 שעות או 8 שעות. ניתן לבצע התאמה זו על ידי בחירה בחלק הימני העליון של הדוח.

כל חלק מראה את אחוז הזמן בו ערכי הסוכר שלך היו בתוך אותם חלקים של מאוד נמוך, נמוך, בתוך הטווח, גבוה ומאוד גבוה.

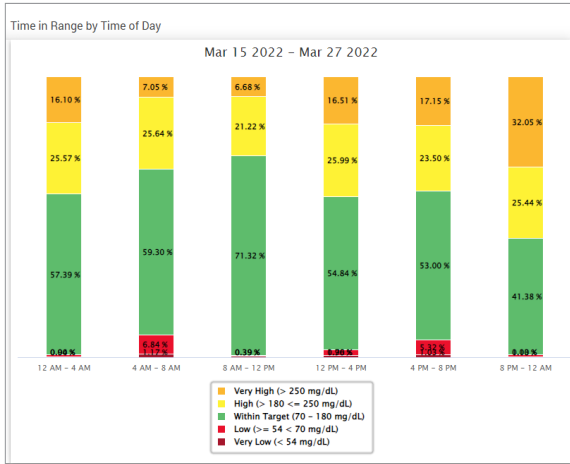



דוח נטיית השינוי של הסוכר

דוח נטיית השינוי של הסוכר מציג מידע בשתי דרכים שונות:

גרף מגמת הסוכר:

- מציג סיכומי קריאות סוכר לפרק זמן של 24 שעות.
- כולל מספר רב של ימים המופיעים על גבי אותו הגרף.
- מראה את קריאת הסוכר המקסימלית, המינימלית והמוצעת עבור כל שעה.
- מספק תמונות חזותיות של שינויים ברמות הסוכר היומיות שלך.

הערה: הנח את הסמן שלך מעל לקריאת סוכר חיישן ממוצעת מסוימת על מנת לראות פרטים על הקריאות במהלך אותה השעה.

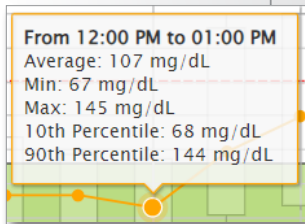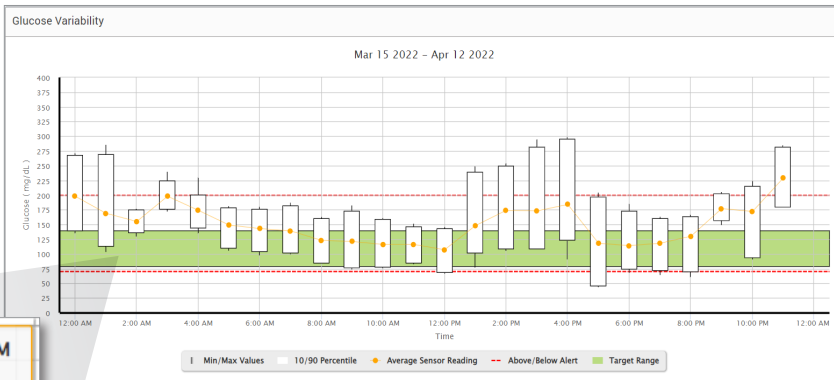

הטבלה:

GLUCOSE	00:00-04:00	04:00-08:00	08:00-12:00	12:00-16:00	16:00-20:00	20:00-00:00	TOTAL
% Below Low Alert	-	-	-	3%	12%	2%	3%
% Above High Alert	31%	2%	-	19%	9%	23%	14%
Number of Values Below Low Alert	-	-	-	3	12	2	17
Number of Values Above High Alert	29	2	-	18	9	19	77
% Within Target	20%	40%	51%	45%	30%	13%	33%
% Below Target	-	-	8%	9%	20%	6%	7%
% Above Target	80%	60%	41%	46%	50%	81%	59%
Average Glucose	182 mg/dL	150 mg/dL	119 mg/dL	150 mg/dL	133 mg/dL	169 mg/dL	150 mg/dL
Lowest Glucose	103 mg/dL	97 mg/dL	73 mg/dL	67 mg/dL	44 mg/dL	61 mg/dL	44 mg/dL
Highest Glucose	285 mg/dL	229 mg/dL	182 mg/dL	294 mg/dL	298 mg/dL	284 mg/dL	298 mg/dL
Standard Deviation	45.2 mg/dL	31.2 mg/dL	33.1 mg/dL	55.3 mg/dL	59.5 mg/dL	46 mg/dL	50.9 mg/dL
Number of Values in the 10-90 Percentile	79	74	80	75	78	68	446
Total Number of Glucose Values	95	91	95	93	96	84	554
Number of Days with at least One Value	2	2	2	2	2	2	2
Average Number of values per Day	48	45	48	45	48	42	277

- מארגנת נתוני סוכר על פי מרווחים של 4 שעות.
- מספקת ניתוח סטטיסטי מפורט עבור כל מרווח זמן.
- כוללת אחוזי קריאות הנמצאות בתוך, מעל ומתחת לטווח יעד הסוכר.
- מספקת מיון של שימוש באינסולין ופחמימות אשר הוזנו עבור אותם מרווחי זמן.

הערה: אם יש לך בעיות בהצגת הדוח, נסה להגביל את טווח התאריכים שלך. בדרך כלל כמיות גדולות של נתונים לא תאפשרנה את תפקודו של הדוח.

הרצת הדוח

1. בחר > Reports > Glucose Variability (דוחות < נטיית השינוי של הסוכר)

טווח התאריכים המוצג יהיה השבוע האחרון בו הוזנו או הועלו נתונים.

2. בחר את טווח התאריכים

הערה: על מנת לשנות את טווח התאריכים עבור הדוח, עקוב אחר הוראות *Setting Date Range* (קביעת טווח תאריכים) שניתנו קודם בחלק *Dashboard* (תמונת מצב) במדריך זה למשתמש.

דוח מגמת הסוכר

דוח מגמת הסוכר:


- מציג קריאות סוכר פרטניות לפרק זמן של 24 שעות.
- מציג מספר רב של ימים המופיעים על גבי אותו הגרף.
- מספק דרך קלה לזהות את נטיית השינוי במהלך ימות השבוע.

הרצת הדוח

1. בחר **Reports > Glucose Trend** (דוחות < מגמת סוכר)

2. בחר את טווח התאריכים

נקודות נתונים על גבי הדוח מקודדות צבעים כאשר כל יום בשבוע מוצג בצבע אחר. אתה יכול להשתמש במסנני הדוח על מנת לבחור את היום/ימים אותם תרצה להציג על הגרף.

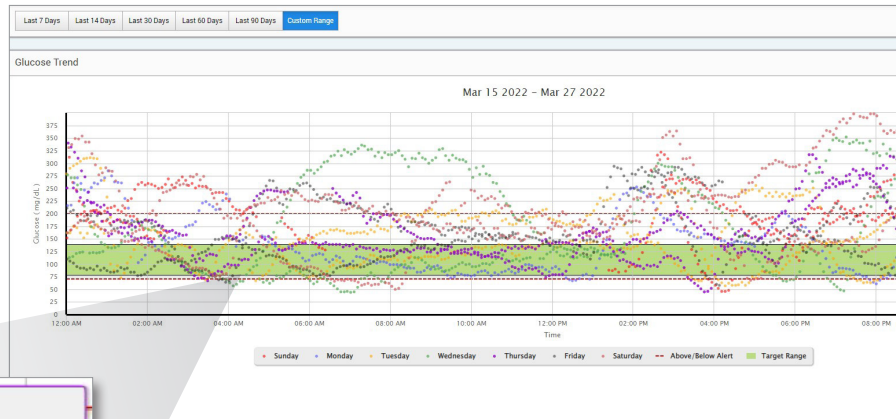

Sensor Glucose
 103 mg/dL
 3/24/2022 10:50:32 AM
 Thursday

הערה: הנח את הסמן שלך מעל לקריאת סוכר חיישן מסוימת על מנת לראות פרטים על אותה הקריאה.

דוח היסטוריית הסוכר


דוח היסטוריית הסוכר מציג CGM היסטוריים ונתונים אשר הוזנו באופן ידני בצורה של גרף מגמה. דוח היסטוריית הסוכר מספק דרך יעילה לעקוב אחר קריאות סוכר החיישן ואחר הכיולים.

הרצת הדוח

1. בחר **Reports > Glucose History Report** (דוחות < דוח היסטוריית הסוכר)

2. בחר את טווח התאריכים

כל נקודת נתונים מהווה קריאת סוכר חיישן בודדת. האירועים שתועדו באפליקציה הניידת מוצגים בדוח בזמן שבו הם תועדו. אם תבחר טווח נתונים של יותר מ-30 ימים, אירועים כגון ארוחות, אינסולין וכו', לא יוצגו.

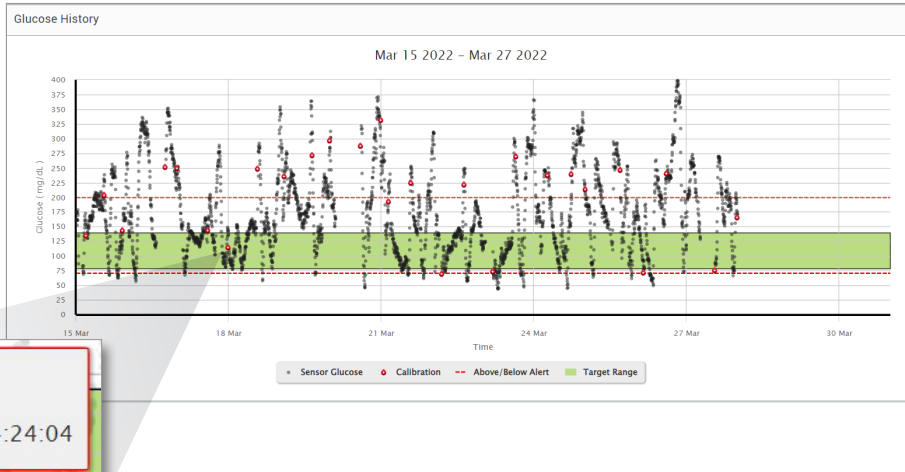

Calibration
70 mg/dL
22/03/2022 04:24:04

הערה: הנח את הסמן שלך מעל לקריאת סוכר חיישן מסוימת על מנת לראות פרטים על אותה הקריאה. אתה יכול גם להניח את הסמן מעל לסמל אירוע על מנת לראות פרטים לגבי אותו האירוע.

דוח התפלגות הסוכר

דוח התפלגות הסוכר:

- מארגן את נתוני הסוכר שלך בהתאם ליעדי הסוכר שלך ולטווחי ההתרעות ומציג את הנתונים בצורה של גרף עוגה.
- מציג גרפי עוגה נפרדים עבור התקופה הנוכחית ועבור תקופות קודמות.
- טווח היעד מוגדרים תחת הגדרות הסוכר.
- מספק בדיקה חזותית עבור מספר הקריאות שהיו בטווח היעד במהלך טווח שנבחר מראש ואת השינוי לאורך הזמן.


הרצת הדוח

1. בחר Reports > Glucose Distribution Report (דוחות < דוח התפלגות הסוכר)

2. בחר את טווח התאריכים

הצגת הדוח

דוח התפלגות הסוכר יציג שני גרפי עוגה על בסיס טווח התאריכים אותו תבחר מראש. הוא יראה את הנתונים הנוכחיים והנתונים הקודמים עבור טווח התאריכים הנבחר. נתונים אלו מאפשרים לך לבצע השוואה של שינויי הווה ועבר כחלק מן הניהול שלך.

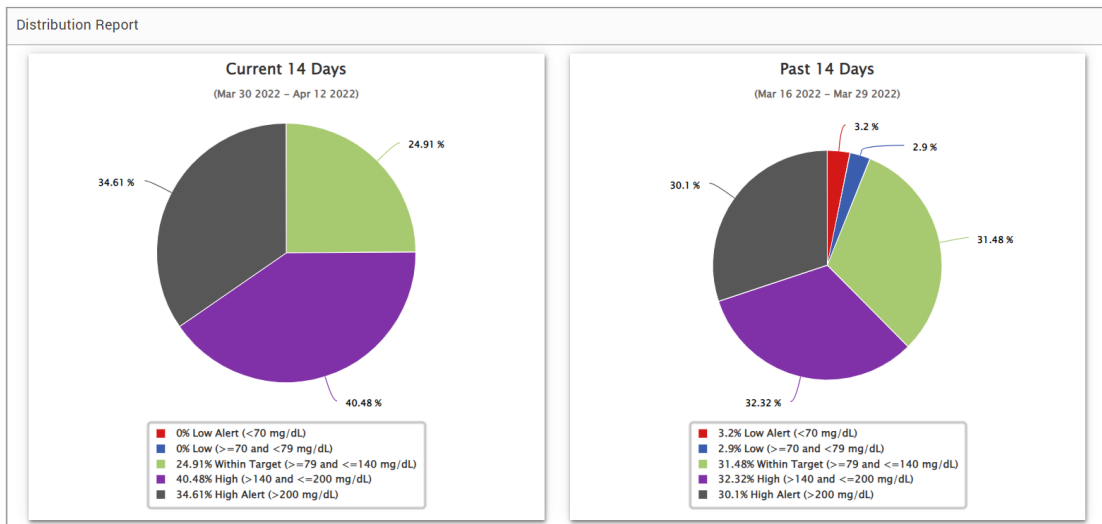

דוח יומן משדר

דוח יומן המשדר מספר סקירה מקיפה של הנתונים בתוך טווח התאריכים הנבחר.

דוח יומן המשדר מציג שלוש טבלאות נפרדות:

- **Blood Glucose** (סוכר בדם): טבלה זו מציגה רשימה של כל קריאות הסוכר בדם שהוזנו ידנית ואירועים קשורים בסדר כרונולוגי.
- **Event Entries** (הזנות אירועים): טבלה זו מציגה אירועי מטופל אשר הוזנו באמצעות אפליקציית Eversense הניידת.
- **Sensor Glucose** (סוכר חיישן): טבלה זו מציגה ערכי סוכר אשר נקראו על ידי החיישן.

הרצת הדוח

1. בחר **Reports > Transmitter Log** (דוחות < יומן משדר)

2. בחר את טווח התאריכים

הצגת הדוח

האירועים מוצגים עם מידע בנוגע לתאריך, השעה ו-:

- **Blood Glucose** (סוכר בדם): ערך סוכר, יחידה, כיול
- **Event Entries** (הזנות אירועים): סוג האירוע, תת סוג האירוע, ערך
- **Sensor Glucose** (סוכר חיישן): ערך סוכר, יחידה, מזהה חיישן

ניתן למיין את האירועים בסדר עולה או בסדר יורד על ידי לחיצה על ראש העמודה. מספר הרשומות מצוין בסופו של כל יומן.




Blood Glucose




Search

Manual Used Not Used Export Data

DATE	TIME	BLOOD GLUCOSE	UNIT	CALIBRATION
01-April-2022	23:44	252	mg/dL	Used
01-April-2022	13:25	223	mg/dL	Used
01-April-2022	02:24	344	mg/dL	Used
01-April-2022	01:03	402	mg/dL	Not Used
31-March-2022	10:22	103	mg/dL	Used
30-March-2022	23:31	187	mg/dL	Used
30-March-2022	14:17	135	mg/dL	Used
30-March-2022	00:58	153	mg/dL	Manual

8 total « « 1 » »

סמל מתחת לעמודה “**Calibration**” (כיוול) בטבלת ה-‘סוכר בדם’ יציין האם ערך הסוכר  שימש לכיוול, לא שימש, או  היה ידני. 

- Used** (שימש): ערך סוכר בדם אשר אותו הזנת כערך כיוול והוא התקבל על ידי המערכת. 
- Not used** (לא שימש): ערך כיוול אותו הזנת הנמצא מעל ל-400 מ"ג/ד"ל או מתחת ל-40 מ"ג/ד"ל. 
- Manual** (ידני): אירוע סוכר בדם אשר לא הוזן כערך כיוול. 

בחירה של "Device History" (היסטוריית מכשיר) תראה מתי החיישן הוחדר, כמו גם את תאריך תחילת הכיול.


3

ייצוא של נתונים

מעמוד 'דוח יומן המשדר', אתה יכול גם לייצא נתונים בפורמת .xlsx.

1. בחר Reports > Transmitter Log (דוחות < יומן משדר)

2. בחר "Export all" (ייצא הכל) בחלק העליון של העמוד על מנת לייצא את כל נתוני יומן המשדר כ-.xlsx (גיליון Excel)

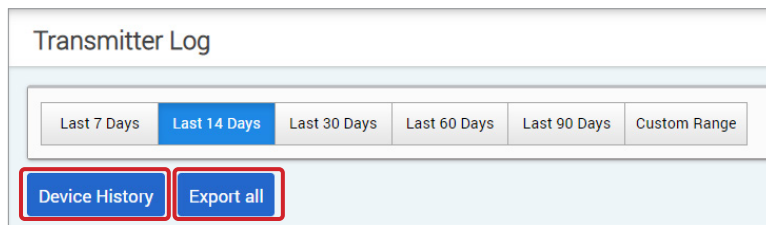

4. Settings (הגדרות)

סוכר

הגדרות הסוכר מאפשרות לך להתאים אישית את רמות היעד וההתרעה עבור הסוכר שלך. הגדרות אלו משפיעות על הצורה בה הסוכר ונתוני אירועים אחרים מאורגנים ומוצגים בדוחות. כאשר אתה מסנכרן באופן אלחוטי את הנתונים שלך באמצעות תכונת 'שתף את הנתונים שלי' באפליקציה הניידת, הגדרות הסוכר אותן שמרת באפליקציה תסונכרנה גם הן אל חשבון ה-DMS שלך.

הערה:

- לא יתבצע סנכרון של הגדרות הסוכר כאשר הנתונים מועלים מן המשדר החכם באמצעות כבל ה-USB עם אפליקציית הלקוח של Eversense.
- שינוי ההגדרות בתוך ה-DMS לא ישנה את ההגדרות אותן הזנת באפליקציית Eversense הניידת. אתה יכול לשנות את ההגדרות עבור מערכת ה-Eversense CGM שלך היישר על גבי אפליקציית Eversense CGM הניידת.

Glucose Settings

Unit Of Measure mg/dL mmol/L

Target Range (must be between Alert Settings)

High Target *	-	140	+
Low Target *	-	79	+

Alert Range (must be between 60 and 350)

High Alert *	-	200	+
Low Alert *	-	70	+

Cancel Save

על מנת לשנות את ההגדרות בתוך חשבון ה-Eversense DMS שלך, יש לבצע את השלבים הבאים:

1. בחר Settings > Glucose (הגדרות < סוכר)

2. הקש על לחצן מ"ג/ד"ל או ממו"ל/ל' מתחת ל-'יחידות המידה' על מנת לבחור את יחידת המידה בה אתה רוצה שנתוני הסוכר יוצגו.

אם אתה משנה את יחידת המידה, ערכי טווח הסוכר וערכי טווח ההתרעות ישתנו בהתאם.

3. הקש על לחצני +/- בצד הימני של ה-'יעד הגבוה' וה-'יעד הנמוך' על מנת להציג ולשנות את הגבול הגבוה והגבול הנמוך של טווח היעד של הסוכר שלך.

4. חזור על שלב זה עבור טווח ההתרעה של הסוכר


5. כאשר סיימת לבצע את השינויים, הקש על "Save" (שמור) על מנת לשמור את השינויים שלך

הערה: הגדרות Eversense DMS לא תשפיענה על הגדרות מערכת ה-Eversense CGM והן תשפיענה רק על האופן בו הנתונים מאורגנים ומוצגים בתצוגת Eversense DMS.

הגדרות דוח סיכום מאפשרות לך לקבוע דוח אוטומטי מתוכנן באופן סדיר אשר יישלח אליך בדוא"ל. אתה יכול לבחור את הדרך בה תקבל את הדוחות ואלו דוחות תרצה לקבל.

הערה:

- אתה תקבל את הדוחות כקובצי PDF מצורפים אל הודעת דוא"ל.
- כתובת הדוא"ל אליה תקבל את הדוחות היא כתובת הדוא"ל בה עשית שימוש ליצור את חשבון ה-Eversense שלך.

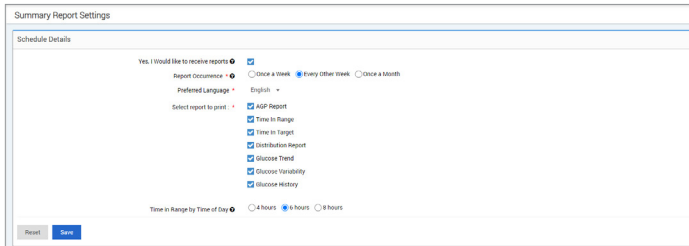

על מנת לשנות את ההגדרות בתוך חשבון ה-Eversense DMS שלך, יש לבצע את השלבים הבאים:

1. בחר **Settings > Report Summary** (הגדרות > דוח סיכום)
2. לחץ על התיבה ליד **"Yes, I would like to receive reports"** ("כן, אני רוצה לקבל דוחות") כך שניתן יהיה לראות את הסימון
3. בחר באיזו תדירות תרצה לקבל את הדוחות אל כתובת הדוא"ל שלך
 - **Once a week** (פעם בשבוע): אתה תקבל את הדוח בכל יום ראשון. הדוחות יציגו את הנתונים אותם מערכת ה-Eversense CGM שלך חישה בשבוע הקודם.
 - **Every Other Week** (פעם בשבועיים): אתה תקבל את הדוח ביום ראשון פעם בשבועיים. הדוחות יציגו את הנתונים אותם מערכת ה-Eversense CGM שלך חישה בשבועיים הקודמים.

• **Once a Month** (פעם בחודש): אתה תקבל את הדוח ביום הראשון בכל חודש. הדוחות יציגו את הנתונים אותם מערכת ה-Eversense CGM שלך חישה בחודש הקודם.

4. בחר את השפה בה תרצה שהדוחות יוצגו

5. בחר אלו דוחות תרצה לקבל

הערה:

- הדוחות יישלחו כצרופת PDF בהודעת הדוא"ל אותה תקבל.
- אם תבחר את דוח הזמן בתוך המטרה, אתה תהיה חייב גם לבחור את הגדרת השעה ביום. למידע נוסף אודות דוח זמן בתוך הטווח על פי זמן היום, ראה *Reports (דוחות)*.

6. לחץ על "Save" (שמור)

- לאחר שהגדרה נשמרה, אתה תקבל את הודעת הדוא"ל הראשונה שלך ביום הראשון של המחזור הבא.
- אם תבחר בפעם בשבוע או פעם בשבועיים, אתה תקבל את הדוח הראשון שלך ביום ראשון העוקב לכך.
- אם תבחר בפעם בחודש, אתה תקבל את הדוח הראשון שלך ביום הראשון של החודש הבא.

על מנת להפסיק לקבל דוח סיכום בהודעות דוא"ל:

1. בחר Settings > Report Summary (הגדרות > דוח סיכום)

2. לחץ על התיבה ליד "Yes, I would like to receive reports" ("כן, אני רוצה לקבל דוחות") כך שלא יהיה סימון בתוך התיבה

3. לחץ על "Save" (שמור) בחלק התחתון של העמוד

הערה: אם לא ביצעת סנכרון של הנתונים שלך אל חשבון ה-Eversense שלך מתוך מערכת ה-Eversense CGM שלך במהלך תקופת דוח אחת, אתה תקבל הודעת דוא"ל האומרת לך שלא תקבל יותר הודעות דוא"ל עד אשר לא תבצע את סנכרון הנתונים אל החשבון שלך.

5. Transmitter (מסדר)

העלה נתוני מכשיר

5

ניתן להעלות את נתוני ה-CGM שלך אל חשבון ה-DMS שלך באופן אלחוטי או על ידי שימוש בכבל ה-USB אשר סופק לך ביחד עם מערכת ה-Eversense CGM שלך:







1. אם פונקציית Auto Sync (סנכרון אוטומטי) מופעלת באפליקציית Eversense הניידת שלך, נתוני ה-CGM שלך יועלו באופן אוטומטי אל חשבון ה-DMS שלך בכל 5 דקות.

עצה: חיבור אלחוטי לאינטרנט מן המכשיר הנייד שלך נחוץ על מנת לסנכרן את הנתונים שלך באמצעות אפליקציית Eversense הניידת.

הערה: אתה יכול להעלות את הנתונים באופן ידני על ידי שימוש בתכונת 'שתף את הנתונים שלי' באפליקציית Eversense הניידת ועל ידי לחיצה על 'התחל סנכרון' על מנת להעלות באופן אלחוטי את נתוני ה-CGM שלך אל חשבון ה-DMS שלך.

2. אתה יכול גם להעלות נתונים מן המסדר החכם דרך כבל USB הניתן ביחד עם מערכת ה-Eversense CGM שלך. על מנת להעלות את נתוני המסדר החכם באמצעות כבל USB, עליך להוריד ולהתקין תחילה את אפליקציית הלקוח של Eversense.

הערה: במהלך תהליך ההעלאה, המסדר החכם שלך לא יאסוף נתונים מן החיישן.

-  Dashboard
-  Reports <
-  Settings <
-  Transmitter
-  Data Share
-  Help <


על מנת להוריד ולהתקין את אפליקציית הלקוח של Eversense:

1. בחר Transmitter (מסדר) ותפריט הגלישה

2. לחץ על PC Download for PC (הורדה עבור מחשב) או Mac Download for Mac (הורדה עבור Mac)

הלחצן המתאים יוצג בהתאם למערכת המחשב בה אתה עושה שימוש.

הערה: לאחר הורדה מוצלחת, אתה עלול לראות אזהרה מן הדפדפן שלך האומרת שהתקנת התכנה איננה מורדת בדרך כלל ושהיא עלולה להיות מסוכנת. Eversense DMS אינה מכילה תכנות זדוניות או ירוסים אשר עלולים להזיק למחשב שלך.

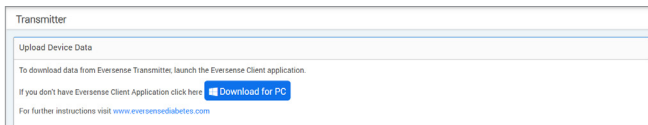


על מנת להוריד את אפליקציית הלקוח של Eversense עבור משתמשי מחשב

1. הרץ את תכנת ההתקנה

אתה יכול גם להקיש על "Save" (שמור) על מנת לשמור את התכנה במחשב שלך ולהתקין אותה במועד מאוחר יותר. כאשר אתה מריץ את התכנה, עקוב אחר החלונות המוקפצים המגיעים מאשף InstallShield.

עבור משתמשי Chrome:

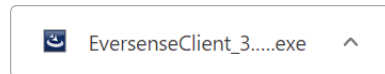


עבור משתמשי Internet Explorer ומשתמשי דפדפנים אחרים:




הערה: אפליקציית הלקוח של Eversense מורדת היישר מתוך Eversense DMS. יכול להיות שיופיע חלון קופץ אשר ישאל אותך אם תרצה להתקין אפליקציה זו בגלל שהיא איננה מורדת מחנות Microsoft. אנא לחץ על "Run Anyway" (הרץ בכל מקרה) בכדי להמשיך את ההתקנה.

2. הקישו דרך אפשרויות ברירת המחדל על מנת להתקין את התכנה


5

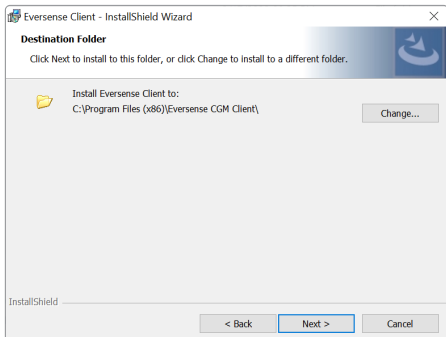


ג.

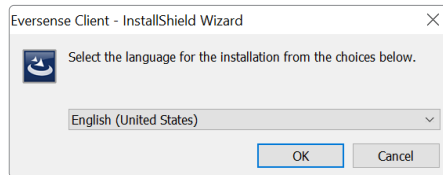


א.

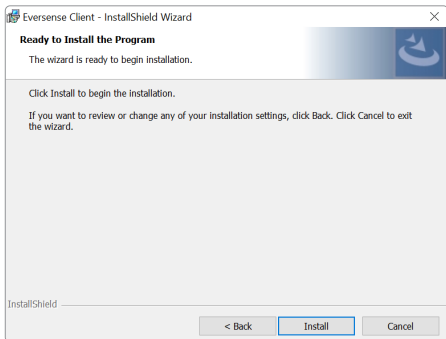


ד.

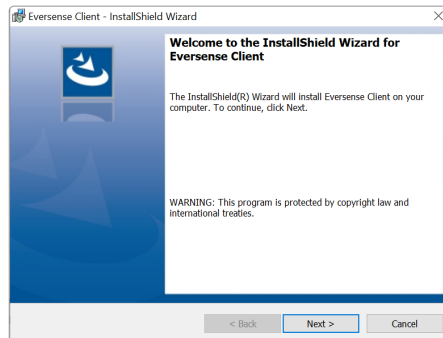

ב.

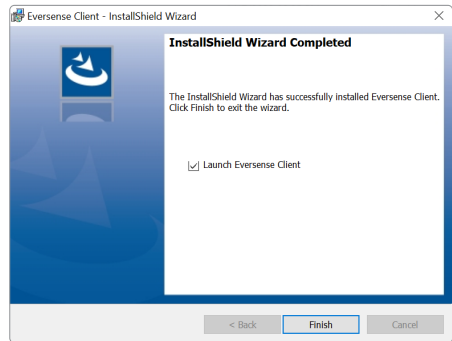

על מנת להוריד את אפליקציית הלקוח של Eversense עבור משתמשי Mac:

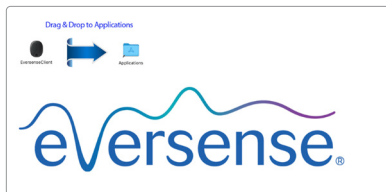


1. הרץ את תכנת ההתקנה

2. גרור ושחרר את אייקון לקוח Eversense אל תיקיית האפליקציה על גבי המסך

5

3. פתח את אפליקציית הלקוח של

Eversense בתוך תיקיית האפליקציות של ה-Mac שלך.

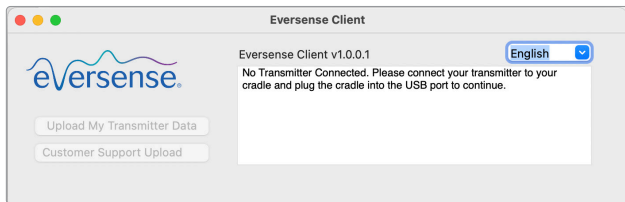

חשוב: אפליקציית הלקוח של Eversense מורדת היישר מתוך Eversense DMS. כאשר תרצה לפתוח את האפליקציה, יכול להיות שיופיע חלון קופץ שאומר ש-APPLE איננה יכולה לפתוח אפליקציה זו. אפליקציית הלקוח של EVERSENSE איננה מכילה תוכנות זדוניות.

על מנת לפתוח את האפליקציה, עליך:

1. לעבור אל System Preferences > Security and Privacy (העדפות מערכת > ביטחון ופרטיות)


2. ללחוץ על "Open Anyway" (פתח בכל מקרה) ליד "Eversense Client was blocked from use because it is not from an identified developer" (אפליקציית הלקוחות Eversense נחסמה בגלל שהיא איננה מגיעה ממפתח מוכר)

3. ללחוץ על "Open" (פתח) בחלון הקופץ הבא

על מנת להעלות את נתוני המשדר החכם אל חשבון ה-DMS שלך:




1. פתח את אפליקציית הלקוח של Eversense על ידי פתיחה של Start menu > All Programs (תפריט התחלה < כל התכניות) פתח את תיקיית Eversense < פתח את תיקיית Eversense Client (לקוח Eversense) < לחץ על הסמל

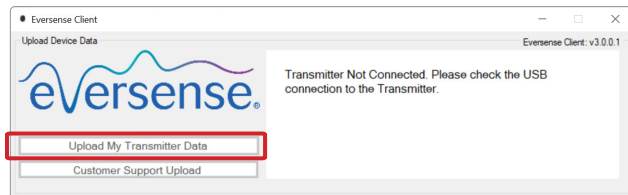




2. הקש על "Upload My Transmitter Data" (העלה את נתוני המשדר החכם שלי) ולאחר מכן הזן את כתובת הדוא"ל בה השתמשת על מנת ליצור את החשבון ואת הסממה

חבר את המשדר החכם שלך אל המחשב שלך באמצעות כבל ה-USB.

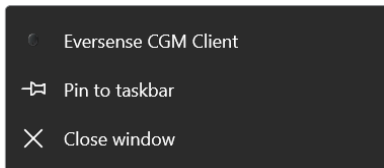


עצה: על מנת שמשתמשי המחשב יפתחו את התכנה במהירות על ידי שימוש במערכות הפעלה של Windows, לחץ לחיצה ימנית על Eversense Client icon (מל לקוח Eversense) והצמד אותו אל ה-Taskbar (סרגל המשימות) או אל תפריט Start (התחלה).

3. כאשר תתבקש לעשות זאת, הקש על "Upload" (העלה) על מנת להתחיל להעלות את נתוני המשדר החכם שלך אל החשבון שלך

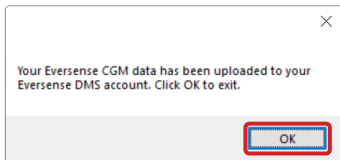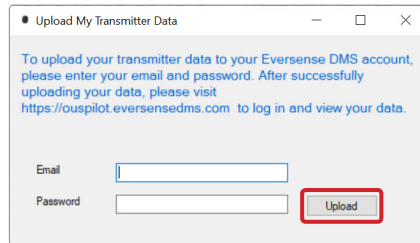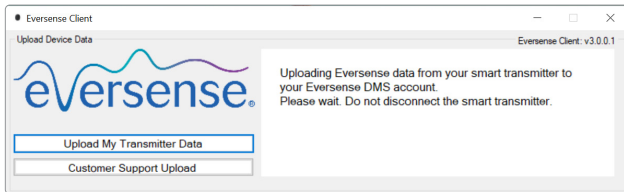


(מחשב)

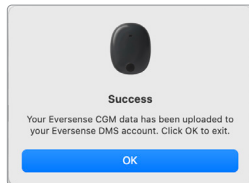

(Mac)

4. הקש על "OK" (אישור) על מנת להשלים

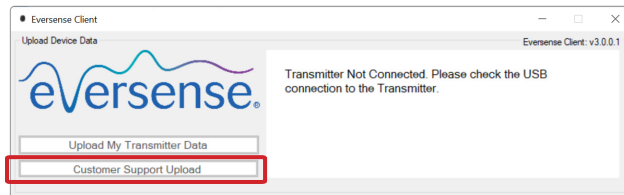

הערה: בעת יצירת קשר עם מחלקת שירות הלקוחות לתמיכה טכנית, אתה עלול להתבקש להעלות את יומן הניתוחים. הדבר ישמש על מנת לשלוח קובץ יומן ניתוחים מן המשדר החכם שלך אל מחלקת שירות הלקוחות. פונקציה זו תהיה בשימוש לאיתור וטיפול מתקדם בבעיות בעזרת הסיוע של מחלקת שירות הלקוחות.

6. Data Share (שיתוף נתונים)

DMS Pro

אתה יכול לחבר את חשבון Eversense DMS Pro שלך אל חשבון Eversense DMS Pro השייך לרופא שלך על מנת לראות ולנתח את דוחות ה-DMS שלך.

הזמנה של המרפאה שלך

על מנת לחבר את חשבון Eversense DMS Pro שלך אל חשבון Eversense DMS Pro השייך למרפאה שלך:

CLINIC NAME	PROVIDER LAST NAME	PROVIDER FIRST NAME	STATUS	DATA SHARE	ENABLE DATA SHARE
High Street Clinic	Johnson	Jon	Accepted	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. הקלד את מספר המרפאה Eversense DMS Pro עבור המרפאה שלך ולחץ על לחצן ENTER (הזנה) על גבי המקלדת שלך.

הערה: צור קשר עם המרפאה שלך אם אינך יודע את מספר Eversense DMS Pro עבורה.

2. בחר את הספק שלך מרשימת הספקים הנשלפת.

3. הקש על "Share My Data" (שתף את הנתונים שלי)

שם המרפאה, שם הספק, המצב והנתונים המשותפים יוצגו. המצב יציג Pending (ממתין) עד אשר המרפאה תקבל את ההזמנה שלך.

לאחר שהמרפאה תקבל את ההזמנה שלך, Pending (ממתין) ישתנה ל-Accepted (התקבל), וה- X ישתנה ל- ✓ בעמודת שיתוף הנתונים.



הספק שלך יוכל כעת לראות את הנתונים שלך מחשבון ה-Eversense DMS Pro שלו/ה.

הזמנה מן המרפאה שלך

המרפאה שלך יכולה להזמין אותך לשתף את הנתונים שלך עם חשבון ה-Eversense DMS Pro שלה. אתה תקבל הודעת דוא"ל מן הכתובת DMS.Feedback@senseonics.com. לחץ על הקישור בהודעת הדוא"ל על מנת לשתף את הדוחות שלך. לאחר שתלחץ על הקישור, החשבון שלך יתווסף אל חשבון ה-Eversense DMS Pro של המרפאה שלך.

6

הסרה של המרפאה שלך

על מנת להפסיק את הגישה של מרפאה אל הנתונים שלך, הקש על  בסוף השורה שלהם. אתה יכול להסיר גישה של מרפאה אותה הזמנת אך עדיין לא בוצעה הסכמה, או של מרפאה לה כבר יש גישה לראות את הנתונים שלך. על מנת לאפשר למרפאה לראות את הנתונים שלך, עליך להקיש על  בכדי לתת להם גישה אל הנתונים שלך.

7. Help (עזרה)

אודות

עמוד זה מציג את הגרסאות העדכניות ביותר של ה-Eversense DMS ושל אפליקציית הלקוח של Eversense.

צרו אתנו קשר

פרטי קשר לתמיכה בלקוחות.

Contact
Contact Us
For Customer Support, please contact your local distributor. To see a list of Eversense distributors, please visit https://global.eversensediabete.com/distributors

7

חשוב: לשאלות אודות מערכת ה-Eversense CGM, צור קשר עם המפיץ המקומי שלך. צור קשר בטלפון 844-SENSE4U (844-736-7348).

חשוב: נטרול של חשבון ה-Eversense DMS ינטרל את החשבון שלך בכל מוצרי Eversense.

Deactivate Account

Deactivate My Account

* Mandatory field
Please submit the form below to deactivate your account.

Reason *

Password *

Secret Question

Answer *

שחרר הערות

מספק מבט כללי על העדכונים האחרונים בתכנת Eversense DMS.

הערה: כאשר ישנו עדכון זמין עבור תכנת Eversense DMS, יוצג כיתוב לרוחב החלק העליון של האתר. לחץ על הכיתוב על מנת לראות את רשימת העדכונים.

:Basic UDI/DI
081749102FG5200T7 :Eversense DMS -

Call 04-6175390 for Customer Support.

Distributed by:

DYN Diagnostics Ltd.
7 Ha'eshel St. P.O. Box 3063
Caesarea Industrial Park 3079504,
Israel
Phone: 04-6175390
Email: patient.care@dyn.co.il


שם הרישום באמ"ר:
מערכת לניטור סוכר רציף E3
Eversense E3 Continuous Glucose Monitoring System
מס' רישום: 2660816

שם היצרן וכתובתו: סנסאוניקס, אינק. סניקה מדווס
פארקווי 20451, ג'רמנטאון, מרילנד 20876-7005, ארה"ב

פרטי בעל הרישום, היבואן והמפיץ בישראל:
דין דיאגנוסטיקה בע"מ
רח' האשל 7, פארק תעשייה דרומי קיסריה, 3079504
04-6175390
patient.care@dyn.co.il
התקשר אל 04-6175390 עבור שירות לקוחות.

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague
The Netherlands



Senseonics, Inc. 
20451 Seneca Meadows Parkway
Germantown, MD 20876-7005 USA
global.eversenseddiabetes.com

פטנטים:

www.senseonics.com/products/patents



(241) LBL-4206-43-001_Rev_B



2797



Dimensions	
Trim: 6.75" w x 5.8" h	Bleed: 0.125"
Folded <i>(Include folded dimensions if applicable)</i> :	

Colors: 4/color
Spot <i>(Name PMS colors if applicable)</i> : N/A

Paper Weight:
Cover: 65# Gloss Cover
Text: 60# Gloss Text